



MPT-II 移动式微型热敏打印机

使用说明



经销商：

Welch Allyn, Inc.

4341 State Street Road

Skaneateles Falls, NY 13153 USA

www.welchallyn.com

39511-4 (CD)

DIR 80022375 版本 D，修订日期 2022 年 6 月

8108699 修订版 4

1. 注意事项

- 必须使用 Welch Allyn 认可的电池。未经认可的电池可能发生泄漏，引起安全危害。
- 按照安装端子的方式安装电池。
- 电池应与一般废弃物分开。请勿将电池作为未分类城市垃圾处理。
- 打印机可能发热。
- 打印时请勿打开盖板。
- 将打印机放在干燥之处。暴露于液体可能损坏打印机。
- 如果打印机长时间闲置，请取出电池。
- 必须使用 Welch Allyn 认可的充电器。使用未经许可的充电器可能会损坏本设备。

2. 一般信息

MPT-II 打印机套装包括：


- 1 件 MPT-II 打印机
- 1 件 MPT-II 充电电池组
- 2 件 直径 40 mm 的热敏打印纸
- 1 件 WA # 39407 电源
- 5 件 全球通用电源适配器
- 1 件 用户手册

连接电缆根据具体仪器单独提供。

3. 操作

装纸：

在两侧推按以打开盖子，如图所示插入纸卷，然后关闭盖子。

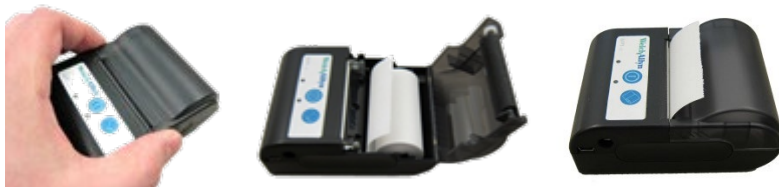

向当地 Welch Allyn 经销商重新订购打印纸。


小心：请勿拆卸打印机。

插入电池组：

如图所示插入电池。



打开电源：

按下电源按钮  两秒钟，可打开或关闭电源。

电源打开时听到一声短蜂鸣音，电源关闭时听到两声短蜂鸣音。



如果打印机由电池供电，则绿色电源指示灯亮起。



指示灯：

绿色 LED 指示灯		蓝色 LED 指示灯		状态	声音	注意
关闭		快速闪烁		正在充电		电源打开
关闭		打开		正在充电		关闭电源
关闭		慢速闪烁		电池几乎 放电完毕		
关闭		打开		充电完成		电源打开
关闭		关闭		充电完成		关闭电源
打开		关闭		电源打开， 电池供电		
慢速闪烁		慢速闪烁		缺纸	蜂鸣音	
慢速闪烁		关闭		睡眠模式		

自检：

打印机电源关闭时，按住 PAPER FEED（进纸） 按钮，然后同时按住 POWER BUTTON（电源按钮）。大约3秒钟后听到蜂鸣音时，释放两个按钮，将打印一张显示当前状态和字符样本信息的测试页。

进纸：

通电时按下 PAPER FEED（进纸） 按钮。只要按下按钮就会进纸。

无线设置：

仪器必须配对后才能进行无线打印。

配对过程如下所示：

1. 打开打印机
2. 让打印机/PC 搜索其他无线设备
3. 设备列表中应出现一台名为“PRT-XX-XX”的设备。
4. 完成配对

关于如何启动无线搜索的详细操作指南，请参阅您设备的用户手册。

注意：搜索时请勿在搜索范围内打开多台打印机。

一台打印机最多可配对8台仪器。如果配对更多仪器，最先配对的仪器将被删除。

4. 技术规格

打印模式：

行式热敏打印

打印宽度：48 mm

分辨率：8点/mm (203 dpi)

每行点数：384 点

热敏纸：

纸宽 = 56 mm +/- 1 mm , 最大直径 40 mm

打印机寿命：

10⁸ 打印脉冲或 50km 打印纸


接口选项：

USB (Mini-USB)

RS-232 (6 针 mini-DIN)


红外 (RAW_IR、VIR、IrDA)

无线 2 类 (范围达 10 m) - 串行端口配置文件 (SPP)

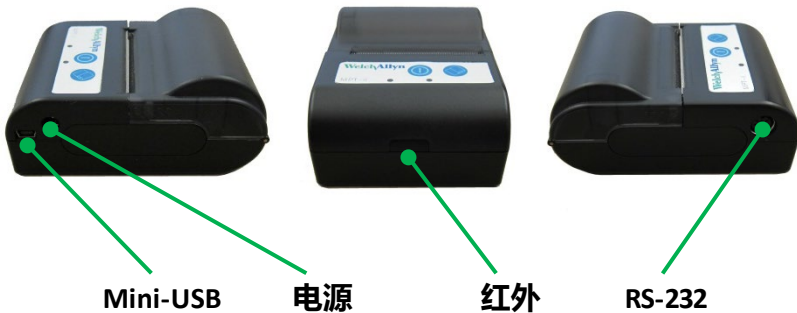

RS-232 引脚说明：

1. TXD
2. RTS
3. DND
4. 预留引脚
5. RXD
6. 预留引脚

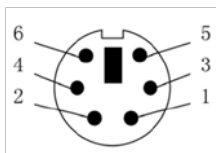

电池组：

2 芯锂电池组 7.4 V-1500 mAh

电源/充电器：

39407

最大电流消耗 0.5A



物理属性：

尺寸：102x75x45 mm (宽 x 长 x 高)

重量：205 g , 含电池 , 不含打印纸

环境规格：

工作温度范围：-10C 至 50C (14F 至- 122F)

工作湿度范围：20% 至 85%

储存温度范围：-20C 至 70C (-4F 至 158F)

