


BRAUN

ThermoScan®
PRO 6000



Guide de nettoyage

Corps du thermomètre

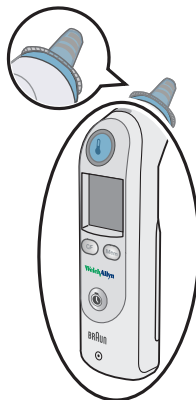


REMARQUE Placez un nouveau couvre-sonde sur le thermomètre avant de le nettoyer, afin de protéger la sonde.

Solutions de nettoyage approuvées

- Solution d'alcool éthylique ou d'alcool isopropylique à 70 %
- Solution de peroxyde d'hydrogène (Virox, Oxivir)
- Composés d'ammonium quaternaire (CaviWipes™, Clinell Universal Wipes®, Sanicloth)
- Solution chlorée à 10 %


1

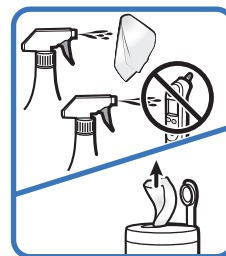

2




3

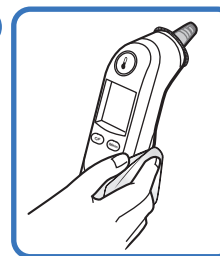

Essuyez. Laissez sécher pendant 5 minutes. Assurez-vous que le corps du thermomètre soit bien sec avant utilisation.

Contacts du thermomètre

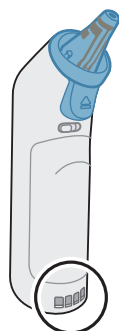


Solutions de nettoyage approuvées

- Solution d'alcool éthylique ou d'alcool isopropylique à 70 %

1



2

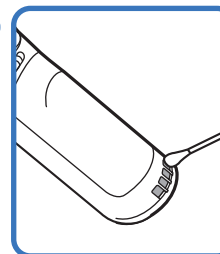

Mettez le thermomètre de côté pendant une minute, afin que les contacts sèchent à l'air libre.


Surface de la lentille et de la sonde



Solutions de nettoyage approuvées

- Solution d'alcool éthylique ou d'alcool isopropylique à 70 % uniquement !


1

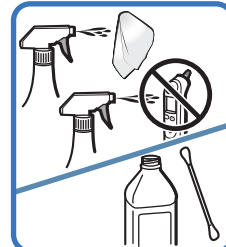

2



3

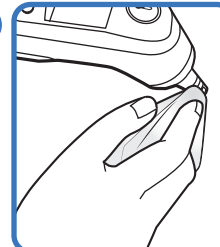

Essuyez. Laissez sécher pendant 5 minutes. Assurez-vous que la surface de la lentille de la sonde soit bien sèche avant utilisation.

80027271 Ver. C
Date de révision : 2021-03
© 2021 Welch Allyn, Inc.
Tous droits réservés.



Ce produit est fabriqué par Welch Allyn, Inc. sous licence sous la marque Braun. Braun est une marque déposée de Braun GmbH, Kronberg, Allemagne. ThermoScan est une marque déposée appartenant à Helen of Troy Limited.

Assistance technique Hillrom

hillrom.com/en-us/about-us/locations/
Welch Allyn, Inc. est une filiale de Hill-Rom Holdings, Inc.