



بدنه تب سنج (دماسنج)



3

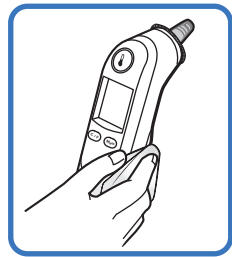

2

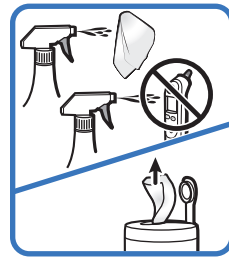

1

توجه قبل از تمیز کردن، یک روکش جدید
پروب روی دماسنج قرار دهید.

محلول های تایید شده تمیزکاری


- الکل ایزوپروپیل 70% یا الکل اتیلیک
- پراکسید هیدروژن (ویروکس، اکسی ویر)
- ترکیبات چهارگانه آمونیوم
(CaviWipes™, Clinell Universal Wipes)
(دستمال مرطوب عمومی), Sanicloth™
- محلول سفید کننده 10% کلر



با دستمال خشک کنید. 5 دقیقه فرصت خشک شدن بدهید.
قبل از استفاده از خشک شدن بدن دماسنج اطمینان حاصل کنید.



محل های تماس دماسنج

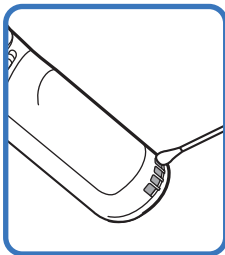


2



1

محلول های تایید شده تمیزکاری


- الکل ایزوپروپیل 70% یا الکل اتیلیک

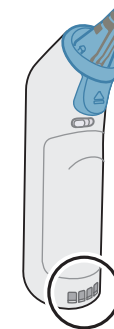

دماسنج را به مدت 1 دقیقه کنار بگذارید، اجازه دهید محل
های تماس در هوا خشک شوند.




پنجره و پروب لنز

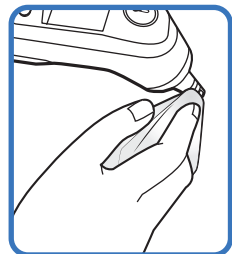

3



2

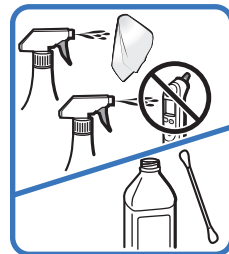

1

محلول های تایید شده تمیزکاری

- فقط الکل ایزوپروپیل 70% یا
فقط الکل اتیلیک!



با دستمال خشک کنید. 5 دقیقه فرصت خشک شدن بدهید.
قبل از استفاده از خشک بودن پنجره لنز پروب مطمئن شوید.



BRAUN
ThermoScan®
PRO 6000



80028925 Ver. A
تاریخ بازبینی: 2021-08
Welch Allyn, Inc. 2021©
همه حقوق محفوظ است.

این محصول توسط Welch Allyn, Inc. تحت مجوز علامت تجاری "Braun"
تولید شده است. "Braun" یک نام تجاری ثبت شده متعلق به شرکت
Braun GmbH است. Thermoscan, یک نام تجاری ثبت شده متعلق
به شرکت Helen of Troy Limited می باشد.

پشتیبانی فنی Hillrom

hillrom.com/en-us/about-us/locations/
Welch Allyn, Inc. یک شرکت تابعه از Hill-Rom Holdings, Inc. است.