

သန့်ရှင်းရေးလမ်းညွှန်

သာမိုမီတာတံ



မှတ်ချက် သန့်ရှင်းရေးမလုပ်မီ အပူချိန်စမ်းတံထိပ်ဖျား အဖုံးအသစ်ကို သာမိုမီတာပေါ်တွင် တပ်ပါ။

အတည်ပြုထားသော သန့်ရှင်းရေးသုံး ဖျော်ရည်များ

- 70% isopropyl alcohol (အိုင်ဆိုပရိုပိုင်း အယ်လ်ကိုဟော) သို့မဟုတ် ethyl alcohol (အီသိုင်း အယ်လ်ကိုဟော)
- Hydrogen peroxide (ဟိုက်ဒရိုဂျင် ပါအောက်ဆိုဒ်) (Virox, Oxivir)
- Quaternary ammonium compounds (ကွာတန်နရီ အမိုနီယမ်ဒြပ်ပေါင်းများ) (CaviWipes™, Clinell Universal Wipes™, Sanicloth)
- 10 % ကလိုရင်းအစွန်းချွတ်ဆေးဖျော်ရည်

1




ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပါ။ ခြောက်သွေ့စေရန် အချိန် 5 မိနစ်ပေးပါ။ အသုံးမပြုမီတွင် သာမိုမီတာတံကို ခြောက်သွေ့အောင် သေချာလုပ်ထားပါ။


2



3

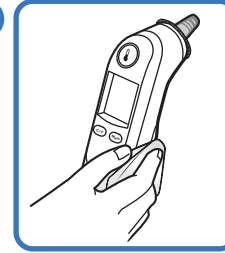

သာမိုမီတာ၏ ထိတွေ့မှုအာရုံခံကိရိယာများ

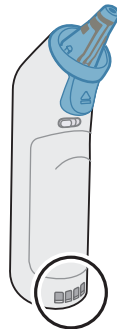


အတည်ပြုထားသော သန့်ရှင်းရေးသုံး ဖျော်ရည်များ

- 70% isopropyl alcohol (အိုင်ဆိုပရိုပိုင်း အယ်လ်ကိုဟော) သို့မဟုတ် ethyl alcohol (အီသိုင်း အယ်လ်ကိုဟော)

1



2

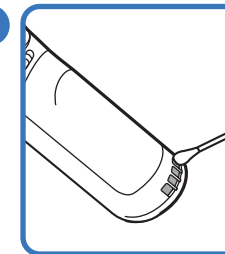

ထိတွေ့မှုအာရုံခံကိရိယာများကိုလေနှင့်ခြောက်သွေ့စေရန်သာ မိုမီတာကို 1 မိနစ်ခန့် ဘေးဖယ်ထားပါ။

မှန်ဘီလူးအကွက်နှင့် အပူချိန်စမ်းတံထိပ်ဖျား



အတည်ပြုထားသော သန့်ရှင်းရေးသုံး ဖျော်ရည်များ

- 70% isopropyl alcohol (အိုင်ဆိုပရိုပိုင်း အယ်လ်ကိုဟော) သို့မဟုတ် ethyl alcohol (အီသိုင်း အယ်လ်ကိုဟော) သာ။


1



2



3

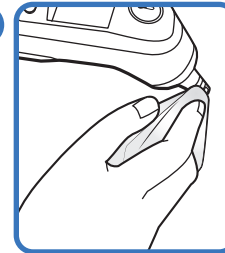

ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပါ။ ခြောက်သွေ့စေရန် အချိန် 5 မိနစ်ပေးပါ။ အပူချိန်စမ်းတံထိပ်ဖျား မှန်ဘီလူးအကွက်ကို အသုံးမပြုမီတွင် ခြောက်သွေ့အောင် သေချာလုပ်ပါ။

BRAUN

ThermoScan®
PRO 6000



80028936 Ver. A
ဖြစ်လည်တည်းဖြတ်သည့်နေ့စွဲ - 2021-08
©2021 Welch Allyn, Inc.
အခွင့်အရေးများအားလုံး လက်ဝယ်
ထားရှိသည်။



ဤထုတ်ကုန်ကို Welch Allyn, Inc. က 'Braun' ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လိုင်စင်အရ ထုတ်လုပ်
သည်။ 'Braun' သည် Braun GmbH, Kronberg, Germany ၏ မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်
အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ThermoScan သည် Helen of Troy Limited က ပိုင်ဆိုင်
သည့် မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

Hillrom နည်းပညာပံ့ပိုးမှု

hillrom.com/en-us/about-us/locations/

Welch Allyn, Inc. သည် Hill-Rom Holdings, Inc ၏ ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။