



Welch Allyn

FlexiPort

Περιχειρίδα μέτρησης αρτηριακής πίεσης

Οδηγίες χρήσης

R_x ONLY

Οι ονομασίες Baxter, FlexiPort και Welch Allyn είναι εμπορικά σήματα της Baxter International Inc. ή των θυγατρικών της.

Για πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν της Baxter, επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής υποστήριξης της Baxter στη διεύθυνση: baxter.com/contact-us.



ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 901043, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ



80031967A , Ημερομηνία αναθεώρησης: 2026-04

Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει για όλα τα  REUSE-XX-XXX.



Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153 USA

baxter.com



Welch Allyn Limited
Navan Business Park, Dublin Road
Navan, Co. Meath, C15 AW22
Ireland



Εξουσιοδοτημένος ανάδοχος στην Αυστραλία

Welch Allyn Australia Pty Limited
1 Baxter Drive
Old Toongabbie NSW 2146
Australia
1800 445 576

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το Καζακστάν

TOO Orthodox Pharm
Uly Dala Avenue 7/4, apt 136, Nur-Sultan 010000, Kazakhstan

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	1
Προοριζόμενη χρήση.....	1
Ενδείξεις χρήσης.....	1
Αντενδείξεις.....	1
Περιγραφές συμβόλων.....	1
Ασφάλεια.....	2
Προειδοποιήσεις.....	2
Προφυλάξεις.....	3
Υπολειπόμενος κίνδυνος.....	3
Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ.....	3
Λειτουργία.....	3
Υποδοχές σύνδεσης περιχειρίδας.....	4
Εξαρτήματα.....	4
Καθαρισμός και απολύμανση χαμηλού επιπέδου.....	4
Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής.....	4
Υλικά.....	5
Καθαρισμός (περιχειρίδες FlexiPort , σωλήνες και εξαρτήματα θύρας).....	5
Καθαρισμός και απολύμανση χαμηλού επιπέδου (περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων FlexiPort , σωλήνες και εξαρτήματα θύρας).....	5
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές.....	6
Ασφαλής απόρριψη.....	7
Κωδικός παρτίδας (σημειώνεται απευθείας επάνω στην περιχειρίδα).....	7
Πρότυπα και συμμόρφωση.....	7
Δηλώσεις συμμόρφωσης.....	7
Εγγύηση.....	8

Εισαγωγή

Προοριζόμενη χρήση

Οι περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης παιδιών και ενηλίκων **Welch Allyn FlexiPort** είναι μη επεμβατικές περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης που προορίζονται για χρήση μαζί με μη αυτόματα και αυτόματα σφυγμομανόμετρα για τον προσδιορισμό της αρτηριακής πίεσης σε παιδιά και ενήλικες ασθενείς.

Η περιχειρίδα αρτηριακής πίεσης **FlexiPort** προορίζεται για χρήση από κλινικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

Ενδείξεις χρήσης

Οι περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης **FlexiPort** προορίζονται για χρήση για αξιολόγηση διαλογής της υγείας ασθενούς ώστε να προσδιοριστεί η συστολική/διαστολική αρτηριακή πίεση όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μη αυτοματοποιημένα και αυτοματοποιημένα σφυγμομανόμετρα.

Αντενδείξεις

Οι περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης παιδιών και ενηλίκων Baxter αντενδείκνυνται για χρήση σε νεογνά.

Περιγραφές συμβόλων

Για πληροφορίες σχετικά με την προέλευση αυτών των συμβόλων, ανατρέξτε στο γλωσσάρι συμβόλων της Welch Allyn: welchallyn.com/symbolsglossary

	Αναγνωριστικό προϊόντος		Αριθμός επαναληπτικής παραγγελίας
	Αριθμός κωδικού παρτίδας		Κατασκευαστής
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Όριο υγρασίας
	Εύρος		Όριο θερμοκρασίας
	Δείκτης εύρεσης αρτηρίας		Όριο στοίβαξης ανά αριθμό
	Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας		Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης



Περίμετρος άκρου (ελάχ./μέγ.)



Δεν έχει κατασκευαστεί από λάτεξ από φυσικό καουτσούκ



Συμβουλευτείτε το σύμβολο οδηγιών χρήσης για ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης (eIFU)

- Ένα αντίγραφο των οδηγιών χρήσης διατίθεται σε αυτόν τον ιστότοπο.
- Μπορείτε να ζητήσετε ένα έντυπο αντίγραφο των οδηγιών χρήσης και θα αποσταλεί δωρεάν εντός 7 ημερολογιακών ημερών.

Ασφάλεια

Προειδοποιήσεις

Οι δηλώσεις προειδοποίησης αυτού του εγχειριδίου υποδεικνύουν συνθήκες ή πρακτικές που θα μπορούσαν να επιφέρουν ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο. Τα σύμβολα προειδοποίησης εμφανίζονται με γκρι φόντο σε ασπρόμαυρα έγγραφα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πιθανό σφάλμα μέτρησης. Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης και αξεσουάρ. Η αντικατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σφάλμα μέτρησης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ανακριβούς μέτρησης. Να χρησιμοποιείτε την περιχειρίδα μόνο όταν το σημάδι εύρεσης της αρτηρίας βρίσκεται εντός του τυπωμένου εύρους που υποδεικνύεται στην περιχειρίδα, διαφορετικά μπορεί να προκύψουν εσφαλμένες μετρήσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενούς. Ποτέ μην τοποθετείτε συνδέσμους με ασφάλεια τύπου Luer σε σωλήνες αρτηριακής πίεσης Baxter. Η χρήση αυτών των συνδέσμων στους σωλήνες περιχειρίδας αρτηριακής πίεσης ενέχει τον κίνδυνο να συνδεθεί κατά λάθος αυτός ο σωλήνας σε ενδοφλέβια γραμμή ασθενούς και να εισαχθεί αέρας στο κυκλοφορικό σύστημα του ασθενούς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην τοποθετείτε την περιχειρίδα σε σημεία του σώματος του ασθενή όπου το δέρμα είναι ευαίσθητο ή τραυματισμένο. Να ελέγχετε την περιοχή της περιχειρίδας συχνά για ερεθισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Να επιτρέπετε χώρο για 1 με 2 δάχτυλα ανάμεσα στο ασθενή και την περιχειρίδα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εφαρμόζετε την περιχειρίδα σε άκρα που χρησιμοποιούνται για ενδοφλέβια έγχυση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ελαχιστοποιήστε τη μετακίνηση της περιχειρίδας και τις κινήσεις των άκρων κατά τη λήψη μετρήσεων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Εξασφαλίστε τη στεγανή σφράγιση σε όλα τα σημεία σύνδεσης, πριν τη χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε ξένα σώματα να εισέλθουν σε σωλήνες ή θύρα στην περιχειρίδα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ενδοφλέβια (IV) συστήματα - Μην συνδέετε περιχειρίδες με συνδέσμους με ασφάλεια Luor σε ενδοφλέβια συστήματα χορήγησης υγρών ειδικά υγρό μπορεί να εισέλθει στην περιχειρίδα.

Προφυλάξεις

Οι δηλώσεις προφύλαξης αυτού του εγχειριδίου υποδεικνύουν συνθήκες ή πρακτικές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό ή άλλο αντικείμενο ή απώλεια δεδομένων.



ΠΡΟΣΟΧΗ Μην πιέζετε την περιχειρίδα με ζεστό σίδερο.



ΠΡΟΣΟΧΗ Μην φουσκώνετε την περιχειρίδα, εκτός κι εάν η πόρπη είναι κλειστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε ατμό ή θερμότητα για να αποστειρώσετε την περιχειρίδα ή τις σωληνώσεις.

Υπολειπόμενος κίνδυνος

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών, μηχανικής ασφάλειας, απόδοσης και βιοσυμβατότητας. Ωστόσο, το προϊόν δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως τον ενδεχόμενο τραυματισμό του ασθενούς ή του χρήστη που οφείλεται στα εξής:

- Τραυματισμό από μηχανικούς κινδύνους,
- Τραυματισμό λόγω μη διαθεσιμότητας συσκευής, λειτουργίας ή παραμέτρου,
- Τραυματισμό λόγω σφάλματος κακής χρήσης, όπως μη επαρκής καθαρισμός ή/και
- Τραυματισμό λόγω έκθεσης της συσκευής σε βιολογικούς κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή συστηματική αλλεργική αντίδραση.

Ειδοποίηση προς χρήστες ή/και ασθενείς στην ΕΕ

Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει προκύψει σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφερθεί στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Λειτουργία

Χρησιμοποιήστε την περιχειρίδα αρτηριακής πίεσης **FlexiPort** το ίδιο όπως μια παραδοσιακή περιχειρίδα αρτηριακής πίεσης. Η περιχειρίδα αρτηριακής πίεσης λειτουργεί με χειροκίνητα και αυτόματα σφυγμομανόμετρα.

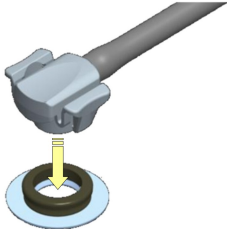
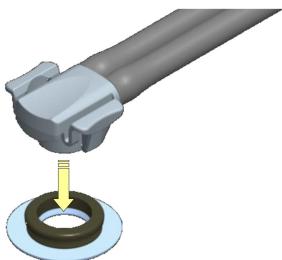
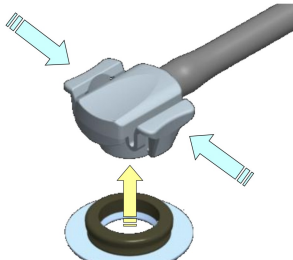
Επιλέξτε μέγεθος περιχειρίδας κατάλληλο για την περιφέρεια του βραχίονα του ασθενή. Το ισχύον εύρος, σε εκατοστά, είναι τυπωμένο σε κάθε περιχειρίδα.

Εύρος τιμών λειτουργικής πίεσης: 0 έως 300 mmHg



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το «Σημάδι εύρεσης της αρτηρίας» στην περιχειρίδα πρέπει να πέφτει εντός του «Εύρους» που υποδεικνύεται στην περιχειρίδα. Εάν το σημάδι εύρεσης της αρτηρίας είναι πριν το εύρος, χρησιμοποιήστε μια μεγαλύτερη περιχειρίδα για να διασφαλίσετε ακριβή αποτελέσματα. Εάν το σημάδι εύρεσης της αρτηρίας είναι μετά το εύρος, χρησιμοποιήστε μια μικρότερη περιχειρίδα για να διασφαλίσετε ακριβή αποτελέσματα.

Υποδοχές σύνδεσης περιχειρίδας

Εξάρτημα θύρας με 1 σωλήνα	Εξάρτημα θύρας με 2 σωλήνες	Πιέστε για να απελευθερωθεί ο σωλήνας
		

Εξαρτήματα

Περιχειρίδα μέτρησης αρτηριακής πίεσης **FlexiPort**

Καπάκι πλύσης Κωδ: 5082-159

Καθαρισμός και απολύμανση χαμηλού επιπέδου

Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής

-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να πραγματοποιούνται από πρόσωπα εκπαιδευμένα στον καθαρισμό και την απολύμανση ιατρικών συσκευών.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Συμβουλευτείτε τις οδηγίες κατασκευαστή των παραγόντων καθαρισμού και των μικροβιοκτόνων καθαριστικών για τη σωστή χρήση τους και τη μικροβιοκτόνο αποτελεσματικότητά τους.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ** Για τις περιχειρίδες **FlexiPort**, εγκαταστήστε το καπάκι πλύσης πριν από τον καθαρισμό. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκύψει βλάβη στη φούσκα της περιχειρίδας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ** Να χρησιμοποιείτε μόνο του τύπου καθαριστικού ή μικροβιοκτόνου καθαριστικού παράγοντα που απαριθμούνται ειδικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην περιχειρίδα.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ** Επαναλαμβανόμενη επανεπεξεργασία μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της συσκευής· ακολουθήστε διαδικασίες επιθεώρησης για να εξασφαλίσετε την ακεραιότητα της συσκευής.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ** Μην τρίβετε έντονα την περιχειρίδα καθώς μπορεί να σημειωθεί ζημιά στις ενδείξεις της περιχειρίδας ή/και στην ακεραιότητα του κλεισίματος της περιχειρίδας.

Υλικά

- Απορρυπαντικό καθαρισμού ουδέτερου pH ενζυματικής βάσης.
- Μικροβιοκτόνο καθαριστικό με βάση τη χλωρίνη κατάλληλο για χρήση σε υγειονομικό εξοπλισμό και ικανό για απολύμανση χαμηλού επιπέδου.
- Καθαρά ή αποστειρωμένα ρούχα, μαλακή βούρτσα, δίσκος μουσκέματος και πόσιμο νερό πλύσης (αποσκληρυμένο κατά προτίμηση).

Καθαρισμός (περιχειρίδες **FlexiPort**, σωλήνες και εξαρτήματα θύρας)

Οι παρακάτω τύποι μαντηλακίων είναι συμβατοί για χρήση στις περιχειρίδες **FlexiPort**. Ο χρήστης πρέπει να κάνει έλεγχο μετά τον καθαρισμό για να βεβαιωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση ρύπων και μολυσματικών παραγόντων.

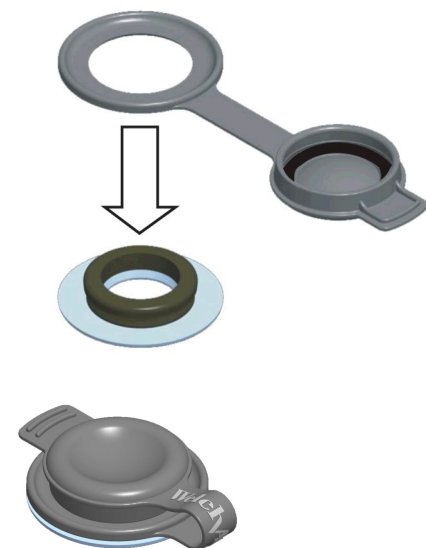
Χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μεθόδους και επιτρέψτε το στέγνωμα στον αέρα:

- Καθαρίστε με ενζυματικό καθαριστικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σκουπίστε με νωπό πανί.
- Ξεβγάλετε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,0375-0,65%. Σκουπίστε με νωπό πανί.
- Καθαρίστε με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη. Σκουπίστε με νωπό πανί.

Καθαρισμός και απολύμανση χαμηλού επιπέδου (περιχειρίδες πολλαπλών χρήσεων **FlexiPort**, σωλήνες και εξαρτήματα θύρας)

Προετοιμασία για καθαρισμό

Εγκατάσταση καπακιού πλύσης REF 5082-159 στη θύρα περιχειρίδας.



Μόνο καθαρισμός (περιχειρίδες και αξεσουάρ συνδέσμου)

1. Προετοιμάστε ενζυματικό διάλυμα απορρυπαντικό καθαρισμού ουδέτερου pH σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Βυθίστε ή μουσκέψτε την περιχειρίδα και τα αξεσουάρ στο διάλυμα. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρών στις σωληνώσεις της φούσκας.
3. Σκουπίστε μαλακά όλες τις επιφάνειες της περιχειρίδας και των αξεσουάρ για να αφαιρέσετε ορατές ακαθαρσίες. Επαναλάβετε, αν χρειάζεται.

Καθαρίστε και απολυμάνετε (περιχειρίδες)

1. Καθαρισμός: Μουσκέψτε καλά (με ψεκασμό ή εμβύθιση) όλες τις επιφάνειες της περιχειρίδας και τα αξεσουάρ με μικροβιοκτόνο καθαριστικό. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρών στις σωληνώσεις της φούσκας.
 - a. α) Βουρτσίστε μαλακά για να αφαιρέσετε ορατές ακαθαρσίες.
 - b. β) εβγάλτε με νερό.
 - c. γ) Στεγνώστε και επιθεωρήστε.
2. Απολυμάνετε: Μουσκέψτε καλά (με ψεκασμό ή εμβύθιση) όλες τις επιφάνειες της περιχειρίδας και τα αξεσουάρ με μικροβιοκτόνο καθαριστικό. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρών στις σωληνώσεις της φούσκας.
3. Βουρτσίστε μαλακά όλες τις επιφάνειες. Αφήστε 5 λεπτά χρόνο επαφής με το υγρό ή περισσότερο, εάν το υποδεικνύει ο κατασκευαστής του μικροβιοκτόνου καθαριστικού. Μην υπερβαίνετε τα 10 λεπτά χρόνου επαφής με το νερό.

Μετά τον καθαρισμό ή τον καθαρισμό και την απολύμανση

1. Επλύνετε σχολαστικά με νερό, έχοντας τοποθετήσει το καπάκι πλύσης. Μην επιτρέπετε την εισχώρηση υγρών στις σωληνώσεις της φούσκας.
2. Στεγνώστε με ένα καθαρό πανί.
3. Αφαιρέστε το καπάκι πλύσης και επιτρέψτε να στεγνώσει στον αέρα.

Επιθεώρηση μετά τον καθαρισμό

Επιθεωρήστε την περιχειρίδα για υποβάθμιση, κατάλληλη ακεραιότητα κλεισίματος και έπειτα φουσκώστε για να εντοπίσετε διαρροές. Μην χρησιμοποιείτε εάν διαπιστωθούν ανωμαλίες στην περιχειρίδα.

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Θερμοκρασία φύλαξης	-20 °C έως 55 °C (-4°F έως 131°F)
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	15% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Θερμοκρασία λειτουργίας	10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)
Σχετική υγρασία λειτουργίας	15% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Ασφαλής απόρριψη

Οι χρήστες πρέπει να τηρούν το σύνολο των ομοσπονδιακών, πολιτειακών, περιφερειακών ή/και τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών όσον αφορά την ασφαλή απόρριψη των ιατροτεχνολογικών συσκευών και εξαρτημάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το τμήμα Τεχνικής υποστήριξης της Baxter για οδηγίες σχετικά πρωτόκολλα ασφαλούς απόρριψης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ Να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους όταν απορρίπτετε μη αυτόματο σφυγμομανόμετρο ή εξαρτήματα.

Κωδικός παρτίδας (σημειώνεται απευθείας επάνω στην περιχειρίδα)

Αποκωδικοποιητής παρτίδας

Κωδικός παρτίδας **FlexiPort**: YYYY-MM-DD-TT

Όπου Y = Έτος, M = Μήνας, D = Ημέρα, T = Εργαλείο

Πρότυπα και συμμόρφωση



ΠΡΟΣΟΧΗ Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ιατρό ή αδειοδοτημένο επαγγελματία του κλάδου υγείας ή κατόπιν εντολής αυτών. Η παρούσα συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Οι περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης **FlexiPort** είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν εντός των ορίων που προδιαγράφονται από Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα ANSI/AAMI/ISO 81060-1:2007 (EN/ISO 81060-1:2012) - Μέρος 1: Απαιτήσεις και μέθοδοι εξέτασης για μη αυτοματοποιημένο τύπο μέτρησης.

Οι περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης **FlexiPort** είναι σχεδιασμένες για να λειτουργούν με αυτοματοποιημένα σφυγμομανόμετρα που έχουν ελεγχθεί με:

- Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2018/AMD 1:2020 - Μέρος 2: Κλινική διερεύνηση αυτοματοποιημένου τύπου μέτρησης.

Δηλώσεις συμμόρφωσης

Μη διαμορφωμένη περιχειρίδα

- REUSE-XX

ISO 80369 Εξαιρ.

Ο σύνδεσμος **FlexiPort** δεν θεωρείται σύνδεσμος μικρής διαμέτρου οπής λόγω της εσωτερικής διαδρομής υγρών του που έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 8,5 mm (ISO 80369-1 Ενότητα 3.13).

HP [σύνδεσμος μπαγιονέτ ή rectus]

- REUSE-XX-1HP

Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 80369-5

MQ [σύνδεσμος στροφής ενός τετάρτου ή υπομικρογραφικός σύνδεσμος] και TP [Σύνδεσμοι Welch Allyn DuraShock και επίτοιχοι/κινητοί ανεροειδείς σύνδεσμοι 767]

- REUSE-XX-1MQ
- REUSE-XX-2MQ
- REUSE-XX-2MF
- REUSE-XX-1TP
- REUSE-XX-2TP
- REUSE-XX-1TPE
- REUSE-XX-2TPE
- REUSE-XX-2BV
- REUSE-XX-2BVC

Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 80369-1



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Καθώς αυτή η περιχειρίδα αρτηριακής πίεσης έχει διαμορφωθεί με σχεδιασμό εναλλακτικού συνδέσμου μικρής διαμέτρου οπής που διαφέρει από εκείνους που ορίζονται στη σειρά ISO 80369, υπάρχει πιθανότητα να προκληθεί εσφαλμένη σύνδεση μεταξύ αυτής της περιχειρίδας αρτηριακής πίεσης και μιας ιατροτεχνολογικής συσκευής που χρησιμοποιεί διαφορετικό εναλλακτικό σύνδεσμο μικρής διαμέτρου οπής, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση και να προκαλέσει βλάβη στον ασθενή. Πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα από τον χρήστη για τον μετριάσμό αυτών των εύλογων προβλέψιμων κινδύνων.

SC [κοχλιωτός σύνδεσμος]

- REUSE-XX-1SC
- REUSE-XX-2SC
- REUSE-XX-2SCC

Το παρεχόμενο σετ σωλήνων πρέπει να χρησιμοποιείται ως μόνιμος προσαρμογέας για τον εύκαμπτο σωλήνα αρτηριακής πίεσης. Παραγγείλετε μη διαμορφωμένες περιχειρίδες αρτηριακής πίεσης **FlexiPort** REUSE (REUSE-XX) για μελλοντική χρήση με σωλήνα αρτηριακής πίεσης που έχει υποστεί μετατροπή (80369-5 Παράρτημα Η, Παλαιοί σύνδεσμοι διόγκωσης περιχειρίδων άκρων).

Εγγύηση

Το προϊόν σας Welch Allyn, όταν είναι καινούριο, είναι εγγυημένο ότι είναι απαλλαγμένο από αρχικά ελαττώματα στα υλικά και την εργασία και ότι αποδίδει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή υπό κανονική χρήση και σέρβις.

Η περίοδος εγγύησης* ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς από την Welch Allyn, Inc., Inc. ή από τους εξουσιοδοτημένους της διανομείς. Welch Allyn Η υποχρέωση της περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων που διαπιστώνεται από την Welch Allyn ότι είναι ελαττωματικά εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης. Αυτές οι εγγυήσεις ισχύουν για τον αρχικό αγοραστή και δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Η παρούσα εγγύηση δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε βλάβη ή αστοχία του προϊόντος που διαπιστώνεται από την Welch Allyn ότι προκλήθηκε από κακή χρήση, ατύχημα

(συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς κατά την αποστολή), αμέλεια, κακή συντήρηση, μετατροπή ή επισκευή από κάποιον άλλον εκτός της Welch Allyn ή ενός από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της.

Αυτές οι ρητές εγγυήσεις αντικαθιστούν τυχόν άλλη και όλες τις άλλες εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, και κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να αναλάβει για την Welch Allyn τυχόν άλλη ευθύνη σε σχέση με την πώληση της Επαναχρησιμοποιούμενης περιχειρίδας μέτρησης αρτηριακής πίεσης **FlexiPort** Welch Allyn. Welch Allyn Η δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιές, είτε άμεσες, τυχαίες είτε παρεπόμενες, που προκύπτουν από την παραβίαση τυχόν ρητής εγγύησης, εκτός των όσων ορίζονται εφεξής.

*Επαναχρησιμοποιούμενη περιχειρίδα μέτρησης αρτηριακής πίεσης Welch Allyn **FlexiPort**: 3ετής εγγύηση.

