



**Hillrom**

**Welch Allyn  
iExaminer Pro**



**Aplicación Welch Allyn iExaminer Pro**

**Otoscopio 238-3 Welch Allyn MacroView Plus**

**Oftalmoscopio 118-3 Welch Allyn PanOptic Plus**

**Conjunto 11840-IEX Welch Allyn SmartBracket**

## **Instrucciones de uso**

**Versión de software 3.3.x**

**Android**

Modo de funcionamiento: Consulte las instrucciones de uso correspondientes de los cabezale

© 2026 Welch Allyn, Inc. Reservados todos los derechos. No se permite a nadie reproducir ni duplicar, de ninguna manera, estas instrucciones de uso en parte o en su totalidad sin el permiso de Welch Allyn. Welch Allyn es una marca comercial de Welch Allyn, Inc. Hillrom es una marca comercial de Hill-Rom Services, Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google, Inc. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita que acompaña a la factura de venta o alquiler de sus productos.

Welch Allyn, Inc. ("Welch Allyn") no asume responsabilidad alguna por las lesiones a personas que puedan derivarse de (i) el uso incorrecto del producto de acuerdo con las instrucciones, precauciones, advertencias o declaraciones de uso previsto publicadas en este manual, o (ii) cualquier uso ilegal o inadecuado del producto.


PATENTE/PATENTES [hillrom.com/patents](https://hillrom.com/patents)

Este producto puede estar cubierto por una o más patentes. Consulte la dirección de Internet indicada anteriormente. Las empresas de Hill-Rom son las titulares de las patentes europeas y de EE. UU., entre otras; además, han solicitado otras pendientes de concesión.

Servicio técnico de Welch Allyn

<https://hillrom.com/en-us/about-us/locations>

Aviso para usuarios o pacientes de la UE: Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra el usuario o el paciente.

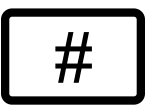 901162 iEXAMINER PRO SW APP ANDROID

 IEXAMINER PRO ANDR

80032161 A, Fecha de revisión: 2026-06

 Welch Allyn, Inc.  
4341 State Street Road  
Skaneateles Falls, NY 13153 EE. UU.  
[hillrom.com](https://hillrom.com)

Patrocinador australiano autorizado  
Welch Allyn Australia Pty. Limited  
1 Baxter Drive  
Old Toongabbie NSW 2146  
Australia

Welch Allyn, Inc. es una filial de Hill-Rom Holdings, Inc.  
Fabricado en EE. UU.

# Índice

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Descripción del dispositivo .....                           | 1  |
| Uso previsto.....                                           | 1  |
| Contraindicaciones.....                                     | 2  |
| Características de rendimiento .....                        | 2  |
| Definiciones de símbolos .....                              | 3  |
| Advertencias y precauciones .....                           | 4  |
| Riesgo residual .....                                       | 5  |
| Datos y seguridad del dispositivo y del paciente .....      | 6  |
| Uso por primera vez .....                                   | 7  |
| Directrices para la selección de smartphones y fundas ..... | 9  |
| Prueba del montaje .....                                    | 10 |
| Uso de las funciones de la aplicación .....                 | 12 |
| Instrucciones de Android .....                              | 13 |
| Elementos de la pantalla (Android) .....                    | 13 |
| Modificar la configuración (Android) .....                  | 14 |
| Autenticación (Android) .....                               | 15 |
| Establecer la contraseña (Android) .....                    | 15 |
| Restablecer la contraseña (Android).....                    | 16 |
| Iniciar sesión (Android).....                               | 17 |
| Exámenes caducados (Android).....                           | 18 |
| Exámenes que caducan pronto (Android).....                  | 24 |
| Añadir un examen (Android).....                             | 25 |
| Capturar imágenes (Android).....                            | 26 |
| Seleccionar imágenes (Android) .....                        | 29 |
| Visualizar la imagen seleccionada (Android) .....           | 30 |
| Guardar un examen (Android).....                            | 32 |
| Actualizar un examen guardado (Android).....                | 33 |
| Compartir un examen (Android).....                          | 35 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Compartir una imagen (Android) .....        | 37 |
| Eliminar un examen (Android).....           | 39 |
| Descartar un examen (Android) .....         | 40 |
| Limpieza .....                              | 41 |
| Eliminación segura .....                    | 42 |
| Compatibilidad electromagnética (EMC) ..... | 42 |
| Almacenamiento y transporte.....            | 43 |
| Accesorios .....                            | 43 |
| Dispositivos compatibles .....              | 43 |
| Garantía .....                              | 44 |

## Descripción del dispositivo

La aplicación **iExaminer** es equivalente a la aplicación **Welch Allyn iExaminer Pro**.

El sistema **iExaminer** con **MacroView Plus** consta de **MacroView Plus**, **SmartBracket**, **SmartClip**, la aplicación **iExaminer** y un smartphone con funda que cumple las [“Directrices para la selección de smartphones y fundas”](#).

El sistema **iExaminer** con **PanOptic Plus** consta de **PanOptic Plus**, **SmartBracket**, **SmartClip**, la aplicación **iExaminer** y un smartphone con funda que cumple las [“Directrices para la selección de smartphones y fundas”](#).

## Uso previsto

La aplicación **iExaminer** con los dispositivos Welch Allyn adecuados está diseñada para ser utilizada por personal médico cualificado con el objetivo de capturar y enviar imágenes de pacientes pediátricos y adultos.

El sistema **iExaminer** con **MacroView Plus** está diseñado para ser utilizado por personal médico cualificado con el objetivo de capturar y enviar imágenes del oído externo, el conducto auditivo y la membrana timpánica en pacientes pediátricos y adultos.

El sistema **iExaminer** con **PanOptic Plus** está diseñado para ser utilizado por personal médico cualificado con el objetivo de capturar y enviar imágenes de los ojos en pacientes pediátricos y adultos.

La aplicación **iExaminer** y el sistema **iExaminer** con **MacroView Plus** están indicados para su uso en entornos sanitarios profesionales como las consultas médicas, los hospitales, la atención especializada y de urgencias, las clínicas y la formación en entornos clínicos.



**NOTA** Utilice el smartphone únicamente en entornos compatibles con las recomendaciones del fabricante.

## Contraindicaciones

No hay contraindicaciones para la aplicación **iExaminer**. Consulte las instrucciones de uso correspondientes del dispositivo de Welch Allyn.

El sistema **iExaminer** con **MacroView** Plus no está diseñado para examinar los ojos.

## Características de rendimiento

Consulte las instrucciones de uso correspondientes del dispositivo de Welch Allyn.

# Definiciones de símbolos

Para obtener información sobre el origen de estos símbolos, consulte el glosario de símbolos de Welch Allyn: [welchallyn.com/symbolsglossary](http://welchallyn.com/symbolsglossary).



**ADVERTENCIA** Las advertencias de este manual indican condiciones o procedimientos que podrían producir lesiones o una enfermedad en el paciente, o incluso la muerte de este. Los símbolos de advertencia aparecen con fondo gris en los documentos en blanco y negro.



**PRECAUCIÓN** Los avisos de precaución de este manual indican condiciones o procedimientos que pueden dañar el equipo u otros dispositivos o causar la pérdida de datos.



**NOTA** Presenta aclaraciones sobre una instrucción o información útil de una función o comportamiento.



Consulte las instrucciones de uso. En este sitio web se puede obtener una copia de las instrucciones de uso. Es posible pedir un ejemplar impreso de las instrucciones de uso a Hillrom, que se entregarán en un plazo de 7 días naturales.

**R<sub>x</sub> ONLY**

Solo con receta o "Para uso por profesionales sanitarios autorizados o por prescripción médica"



Número de reposición



Identificador de producto



Número mundial de artículo comercial



Fabricante

## Advertencias y precauciones



**ADVERTENCIA** Utilice siempre la aplicación iExaminer cuando envíe imágenes o archivos de paciente. No envíe imágenes de pacientes desde el carrito para que no se asocien de manera incorrecta las imágenes de los pacientes. Limite exclusivamente el uso de las imágenes del carrito a la formación y a los usos no clínicos. Consulte [Datos y seguridad del dispositivo y del paciente](#).



**ADVERTENCIA** Este equipo o sistema se ha diseñado para que lo utilicen únicamente profesionales sanitarios. Este equipo/sistema puede provocar interferencias de radio o puede afectar al funcionamiento de equipos cercanos. Es posible que sea necesario tomar medidas atenuantes, como cambiar la orientación o la ubicación del dispositivo, o proteger la ubicación.



**ADVERTENCIA** Riesgo de lesiones del paciente: campos magnéticos. Tenga cuidado cuando utilice un smartphone cerca de dispositivos implantados como implantes craneales, derivación de LCR o marcapasos, entre otros.



**PRECAUCIÓN** Evalúe las imágenes en **Welch Allyn iExaminer** con la luz adecuada. La evaluación de las imágenes no se ha probado en condiciones de poca luz.



**PRECAUCIÓN** Para asegurarse de que el sistema proporciona imágenes de calidad suficiente, compruebe el montaje del sistema. Consulte [Prueba del montaje](#) (Comprobar el montaje).



**NOTA** Consulte las instrucciones de uso correspondientes del dispositivo de Welch Allyn para conocer más advertencias y precauciones.



**NOTA** Consulte las instrucciones de uso correspondientes del dispositivo de Welch Allyn para obtener información sobre los peligros relacionados con la luz asociados al dispositivo.

## Riesgo residual

Este producto cumple las normas correspondientes de interferencia electromagnética, seguridad mecánica y biocompatibilidad. Sin embargo, el producto no puede eliminar por completo el posible daño al paciente o al usuario de lo siguiente:

- daño o deterioro del dispositivo por riesgos electromagnéticos;
- daños por riesgos mecánicos;
- daños por falta de disponibilidad del dispositivo, función o parámetro;
- daños por un uso indebido, como un limpieza insuficiente, o
- daño por la exposición del dispositivo a factores biológicos que pueden dar lugar a una reacción alérgica sistémica grave.

## Datos y seguridad del dispositivo y del paciente

Welch Allyn recomienda habilitar la seguridad a nivel de dispositivo. Los usuarios son responsables de la seguridad del smartphone.

La aplicación **iExaminer** permite al usuario compartir datos de pacientes a través del correo electrónico y el almacenamiento en la nube. Al compartir los datos de pacientes por correo electrónico o almacenamiento en la nube, es esencial que el usuario solo comparta los datos con otros usuarios autorizados de acuerdo con las normativas HIPAA. Es responsabilidad exclusiva del usuario proteger los datos del paciente. Los usuarios deben verificar la identidad del paciente antes de enviar los registros de los pacientes.

Para compartir de forma segura los datos del paciente por correo electrónico, el usuario debe asegurarse de que la aplicación de correo electrónico está configurada para comunicarse de forma segura con el servidor de correo electrónico mediante TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte). La TLS es un conjunto de protocolos criptográficos diseñados para proporcionar seguridad en las comunicaciones a través de una red informática. La TLS tiene como objetivo principal proporcionar privacidad e integridad de los datos entre dos o más aplicaciones informáticas que se comunican entre sí.

Al configurar una cuenta de correo electrónico (p. ej. IMAP, POP), el usuario debe seleccionar un método de seguridad que utilice TLS/SSL. **Gmail**, la aplicación de correo electrónico predeterminada de **Android**, ya está protegida con TLS cuando se utiliza con el servidor de **Gmail** predeterminado.

Al enviar datos de pacientes en un almacenamiento en la nube, es esencial proteger dicho método de almacenamiento mediante TLS. En **Android**, **Google Drive** y **Google Photos** están protegidos mediante TLS.

## Uso por primera vez

Visite [hillrom.com](http://hillrom.com) para ver vídeos del **iExaminer Pro**.

Confirme que ha realizado lo siguiente:

1. Seleccione un smartphone que cumpla los criterios de las [Directrices para la selección de smartphones y fundas](#).
2. Descargue la aplicación **iExaminer** desde **Google Play**.
3. Si está actualizando una versión anterior con imágenes almacenadas, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
4. Seleccione un modo de uso.
  - El modo clínico se utiliza con los pacientes. Los datos del examen deben enviarse desde la aplicación después de cada examen. Los datos de examen no se almacenan en el teléfono.
  - El modo formación se utiliza solo con fines de formación. Al seleccionar este modo, los exámenes de práctica podrán almacenarse durante un periodo de tiempo de entre 30 y 180 días especificado por el usuario, transcurridos los cuales deberá eliminar los datos de la aplicación. En este modo no debe almacenar datos personales ni datos de paciente que puedan identificarse individualmente. El periodo de retención de datos predeterminado es de 30 días para los exámenes de práctica.
5. Acepte los términos y condiciones.
6. Configure la seguridad de las aplicaciones y del smartphone. Revise las recomendaciones de confidencialidad. Consulte [Datos y seguridad del dispositivo y del paciente](#).

7. Consulte las **WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET ASSEMBLY INSTRUCTIONS** (incluidas en la caja) para la configuración inicial. Compruebe que hay espacio suficiente para fijar completamente el adhesivo **SmartBracket** y adhiera el **SmartClip** a la parte posterior lisa, rígida y plana de la funda.
8. Conecte el dispositivo de Welch Allyn al **SmartBracket**.
9. Compruebe el montaje del sistema con la tarjeta de prueba **iExaminer** Resolution (incluida). Consulte [Prueba del montaje](#) (Prueba del montaje).
10. Consulte los vídeos y otros materiales de formación en [hillrom.com](http://hillrom.com) para realizar un examen.



**NOTA** **iExaminer** 3.3.x es compatible con **Android** 11.0 y versiones posteriores.



**NOTA** Para cambiar de modo, desinstale y vuelva a instalar la aplicación. Los datos almacenados se borrarán al desinstalar la aplicación.

## Directrices para la selección de smartphones y fundas

### Funda para smartphone

La funda debe tener una superficie lisa, plana y sin caucho (es decir, que no sea una funda de silicona); no debe tener protuberancias. Algunas funciones (p. ej., el sensor de huellas dactilares, otras cámaras, etc.) impedirán la instalación de **SmartClip**. Consulte las **WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET ASSEMBLY INSTRUCTIONS** (incluidas en la caja).

### Criterios de elección del smartphone

Utilice un smartphone que cumpla los siguientes criterios:

- Tamaño: el tamaño del smartphone y la funda combinados es inferior a 165 mm (6,5 in) de longitud, 85 mm (3,3 in) de ancho y 13 mm (0,5 in) de grosor.
- Peso: el peso del smartphone y la funda combinados es inferior a 280 g (9,8 oz).
- Óptica: la mayoría de las cámaras de smartphone con una resolución igual o superior a 8 MP serán aceptables. Consulte [Prueba del montaje](#) para saber cómo probar el sistema.
- Pantalla: una pantalla en color que tenga un tamaño de  $\geq 101$  mm (4,0 in).
- Hardware:  $\geq 500$  MB de almacenamiento interno
- Software: admite imágenes JPEG y es compatible con **Android** 11.0 y versiones posteriores.
- Especificaciones eléctricas:
  - o Las emisiones radiadas del smartphone deben cumplir la parte 15 del título 47 del Código de normativas federales (Code of Federal Regulations) de los EE. UU. (o equivalente)
  - o La carga inductiva del smartphone debe tener la certificación Qi (o equivalente)
  - o La carga del smartphone debe cumplir con la normativa IEC/UL 60950-1 (o equivalente)

## Prueba del montaje

Abra la aplicación **iExaminer** y realice los siguientes pasos:

1. Fije un mango al cabezal. Si utiliza un oftalmoscopio, gire el mango y ajuste la dioptría a Green 8 (Verde 8) con un foco grande de luz y sin filtro.
2. Acople el cabezal al **SmartBracket**. El cabezal puede acoplarse en 1 de las 4 orientaciones posibles.
3. Coloque la tarjeta de prueba **iExaminer Resolution** (incluida en la caja) sobre una superficie plana.
4. En la pantalla Exam (Examen), toque Add image (Añadir imagen).



**NOTA** En el modo Training (Formación), pulse **+** para iniciar un Exam (Examen).

5. Se iniciará la grabación. La grabación finalizará después de 30 segundos. Pulse **●** para reiniciar la grabación según sea necesario para completar los pasos.
6. Apunte con el visor a una superficie cercana para comprobar que el círculo que aparece en la pantalla del smartphone es un círculo completo.



**NOTA** Si no es un círculo completo, compruebe que el aumento está en 1,0 x y que la apertura de la lente principal está alineada con el **SmartBracket**. Si está mal alineado, siga las instrucciones de retirada de **SmartClip** que se encuentran en la **WELCH ALLYN IEXAMINER SMARTBRACKET STARTUP GUIDE** (Guía de inicio de **iExaminer SmartBracket** de Welch Allyn).

7. Alinee el círculo de la tarjeta de prueba **iExaminer Resolution** con el borde del área visible. Acerque o aleje el visor de la tarjeta según sea necesario. No cambie el aumento.



**NOTA** Si el enfoque automático no funciona, toque la pantalla sobre el objetivo central. El enfoque automático se restablecerá.





**NOTA** Seleccione el círculo objetivo adecuado. Hay uno para oftalmoscopio y otro para otoscopio.


8. Seleccione la mejor imagen. Pellizque para ampliar la imagen capturada de los objetivos de resolución.
9. Compare los 5 objetivos para comprobar que las imágenes tienen 3 líneas visibles. Si no es así, repita la prueba.

Aprobado  
(3 líneas visibles)

Aprobado  
(3 líneas visibles)

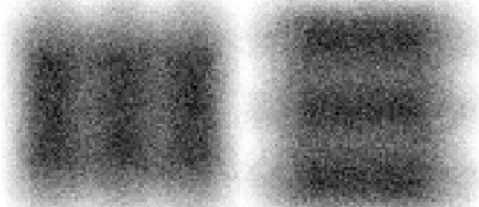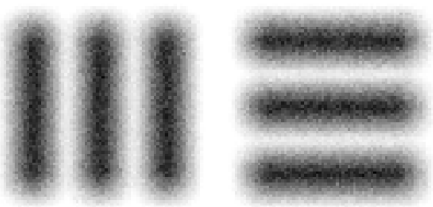

Suspenso\*

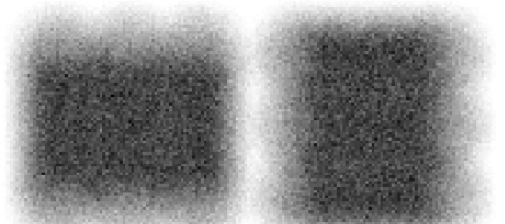

10. Inicie el examen del paciente. Consulte la guía de técnica (incluida en la caja) o las instrucciones de uso (disponibles en la aplicación y en [hillrom.com/getstarted](http://hillrom.com/getstarted)).

\*Póngase en contacto con el servicio técnico de Hillrom o visite [hillrom.com](http://hillrom.com) para obtener ayuda.



# Uso de las funciones de la aplicación

Utilice los siguientes enlaces para ir a una acción o leer las instrucciones completas del sistema operativo del dispositivo.

| Modo formación                                                         | Modo clínico                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Android                                                                | Android                                                                |
| <a href="#">Modificar la configuración (Android)</a>                   | <a href="#">Modificar la configuración (Android)</a>                   |
| <a href="#">Establecer la contraseña (Android)</a>                     | No disponible                                                          |
| <a href="#">Restablecer la contraseña (Android)</a>                    | No disponible                                                          |
| <a href="#">Iniciar sesión (Android)</a>                               | No disponible                                                          |
| <a href="#">Ver un examen caducado (Android)</a>                       | No disponible                                                          |
| <a href="#">Eliminar un examen caducado (Android)</a>                  | No disponible                                                          |
| <a href="#">Ver exámenes que caducan pronto (Android)</a>              | No disponible                                                          |
| <a href="#">Añadir un examen (Android)</a>                             | <a href="#">Descartar un examen (Android)</a>                          |
| <a href="#">Capturar imágenes (Android)</a>                            | <a href="#">Capturar imágenes (Android)</a>                            |
| <a href="#">Seleccionar imágenes (Android)</a>                         | <a href="#">Seleccionar imágenes (Android)</a>                         |
| <a href="#">Visualizar la imagen seleccionada (Android)</a>            | <a href="#">Visualizar la imagen seleccionada (Android)</a>            |
| <a href="#">Aplicar un filtro, mover y eliminar imágenes (Android)</a> | <a href="#">Aplicar un filtro, mover y eliminar imágenes (Android)</a> |
| <a href="#">Compartir una imagen (Android)</a>                         | <a href="#">Compartir una imagen (Android)</a>                         |
| <a href="#">Guardar un examen (Android)</a>                            | No disponible                                                          |
| <a href="#">Actualizar un examen guardado (Android)</a>                | No disponible                                                          |
| <a href="#">Compartir un examen (Android)</a>                          | <a href="#">Compartir un examen (Android)</a>                          |
| <a href="#">Eliminar un examen (Android)</a>                           | <a href="#">Descartar un examen (Android)</a>                          |

Diríjase a [Instrucciones de Android](#) (Instrucciones para Android) para utilizar la aplicación.




# Instrucciones de Android

 **NOTA** Las imágenes se muestran con fines ilustrativos.

 **NOTA** El modo clínico se abre en la pantalla Exam (Examen).

## Elementos de la pantalla (Android)

*Se aplica a: modo formación, modo clínico*

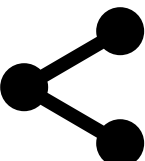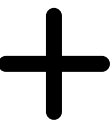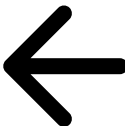
| Icono                                                                               | Definición |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Compartir  |
|  | Eliminar   |
|  | Filtrar    |
|  | Añadir     |
|  | Atrás      |
|  | Realizado  |
|  | Mover      |

## Modificar la configuración (Android)


*Se aplica a: modo formación, modo clínico*

Modifique la configuración, como la resolución de la imagen o el período de retención de datos. Es posible que algunos ajustes solo estén disponibles en un modo específico.

1. En la aplicación, toque el icono del menú en la esquina superior derecha.

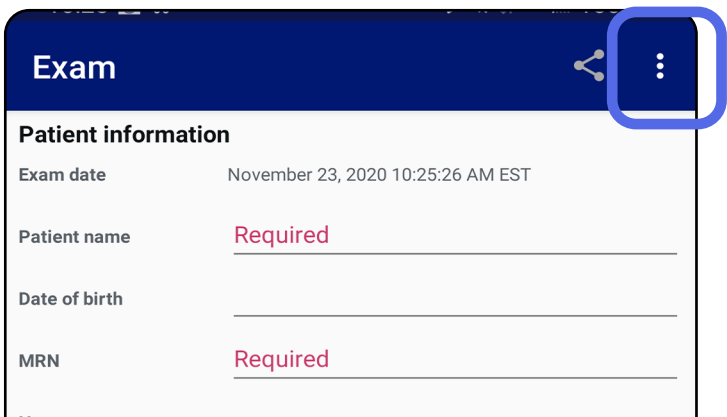

2. Toque **Settings** (Configuración).
3. Modifique las opciones de configuración. [Prueba del montaje](#) de nuevo si cambia la resolución de la imagen.
4. Toque ← en la esquina superior izquierda para guardar la configuración.

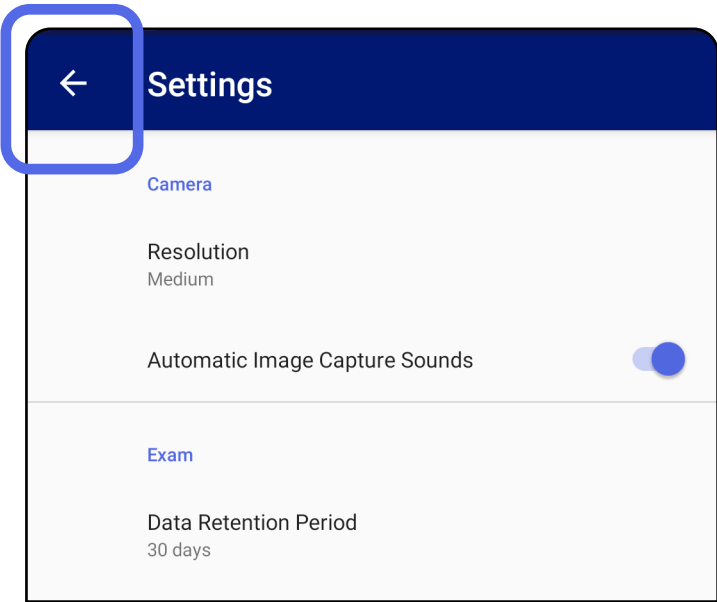

## Autenticación (Android)

*Se aplica a: modo formación*


En la pantalla Authentication (Autenticación), puede:

- [Establecer la contraseña \(Android\)](#)
- [Restablecer la contraseña \(Android\)](#)
- [Iniciar sesión \(Android\)](#)

## Establecer la contraseña (Android)

*Se aplica a: modo formación*

1. Establezca una contraseña que cumpla los criterios de validación.
2. En la pantalla Authentication (Autenticación), introduzca la nueva contraseña dos veces.
3. Toque **Set** (Establecer).

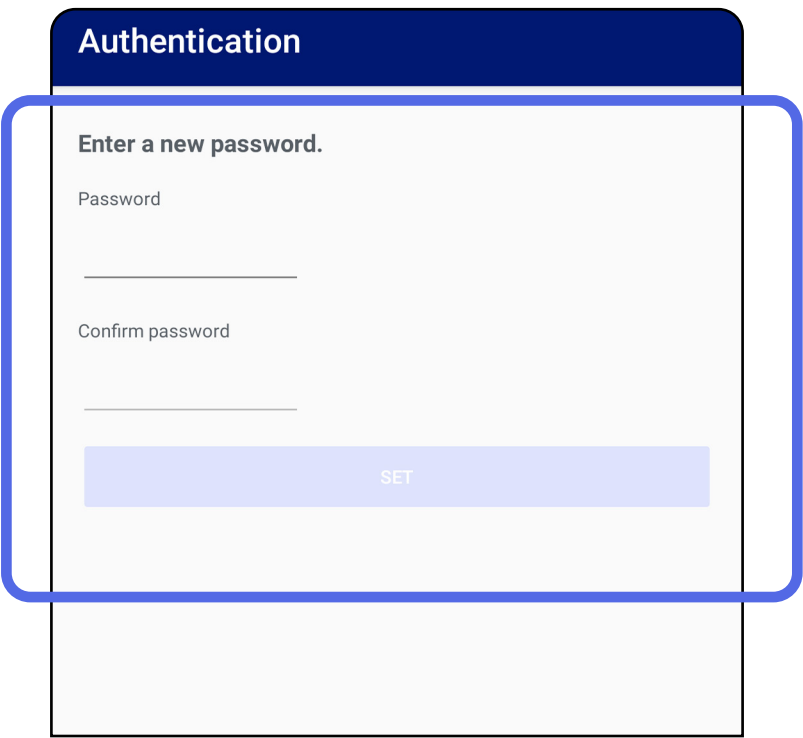

## Restablecer la contraseña (Android)

*Se aplica a: modo formación*

- 1. Para restablecer la contraseña en la pantalla Authentication (Autenticación), toque **Reset** (Restablecer).
- 2. Introduzca una nueva contraseña dos veces.
- 3. Toque **Reset** (Restablecer) para confirmar el restablecimiento de la contraseña. Esta acción no se puede deshacer.



**NOTA** Al restablecer la contraseña se eliminan todos los exámenes existentes de la aplicación.

Authentication

Please enter a new password.

WARNING: This will delete all existing exams!

Password:

Confirm password:

CANCEL

RESET

1234567890

+×÷= / \_ < > [ ]

q w e r t y u i o p

! @ # \$ % & \* ( )


↑ \_ ' " : ; , . ?

!@# ? , English (US) . Next

## Iniciar sesión (Android)

*Se aplica a: modo formación*

- 1. Abra la aplicación.
- 2. Introduzca su contraseña en la pantalla Authentication (Autenticación).
- 3. Toque **Login** (Iniciar sesión).

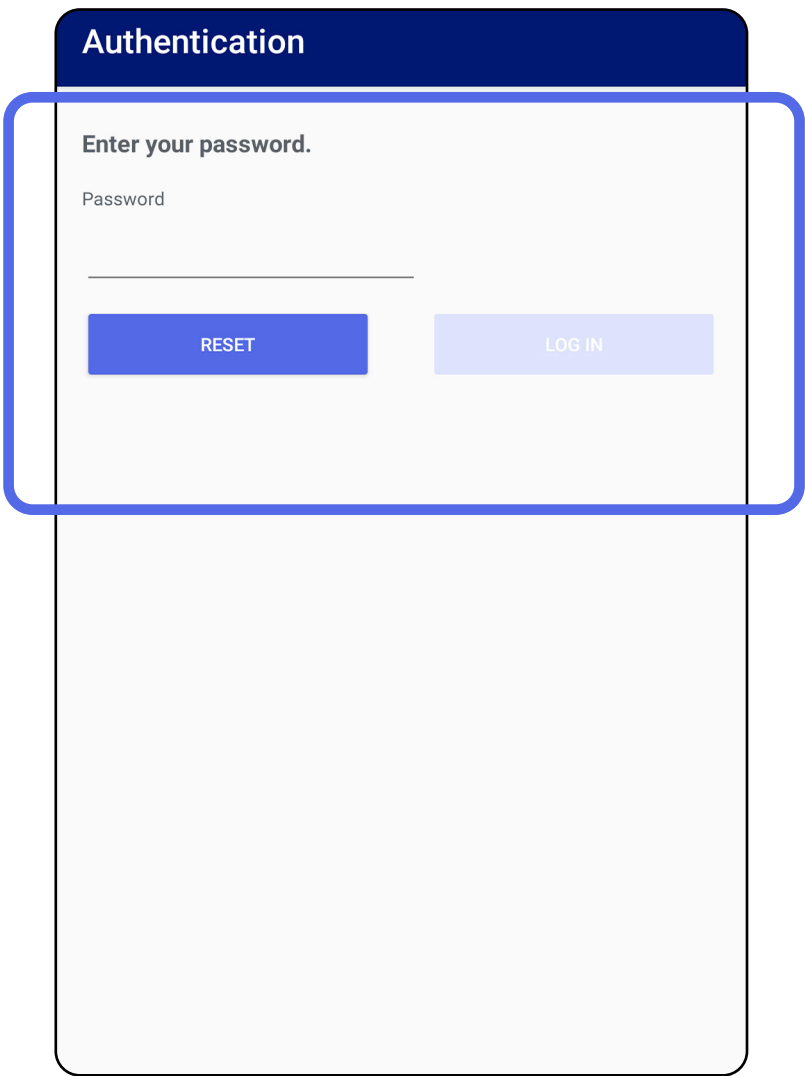


## Exámenes caducados (Android)


*Se aplica a: modo formación*

Cuando se abre la aplicación en el modo formación y existen exámenes caducados, estos deberán eliminarse para continuar utilizando la aplicación. Se mostrará una alerta si alguno de los exámenes ha caducado.

1. Toque OK (Aceptar) para confirmar la alerta.

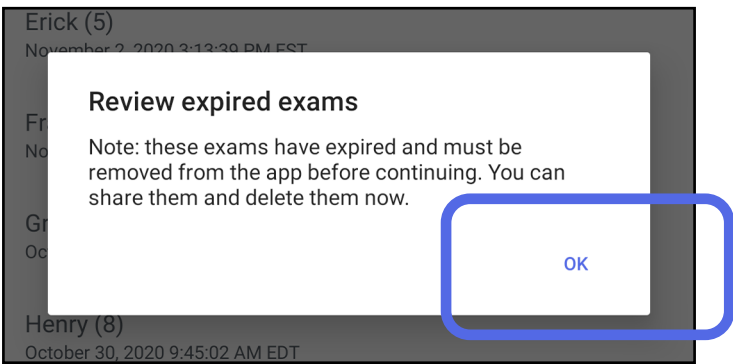

2. Revise la lista de exámenes caducados.

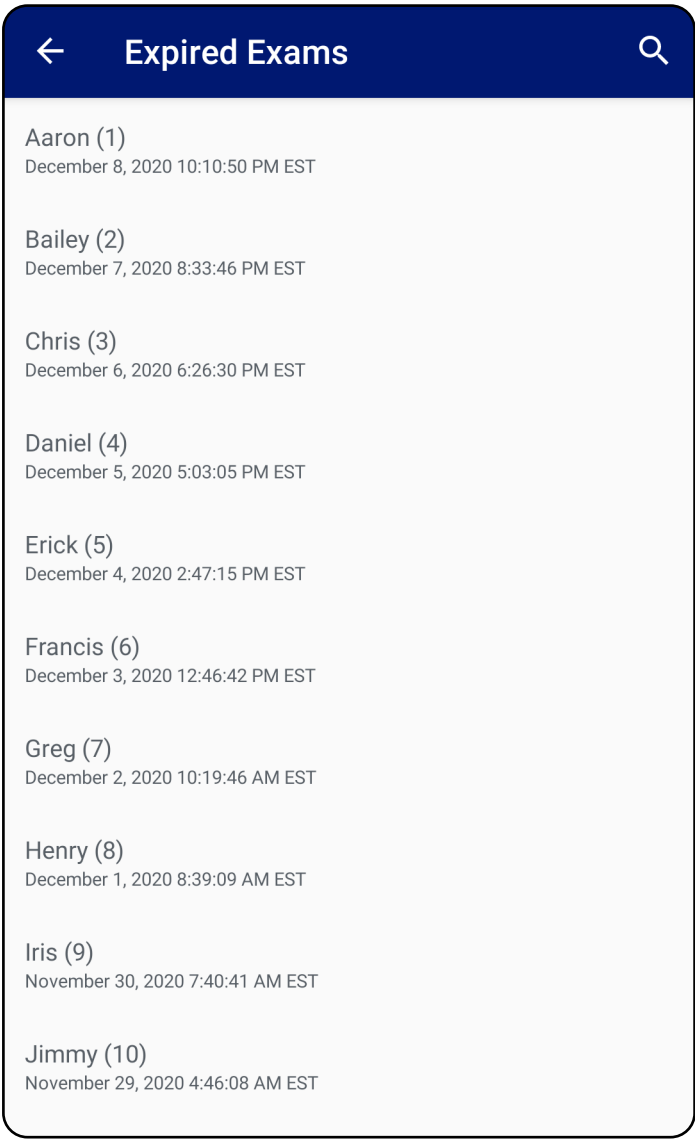


3. [Ver un examen caducado \(Android\)](#) donde puede compartir o eliminar el examen y compartir las imágenes de un examen o [Eliminar un examen caducado \(Android\)](#).

Ver un examen caducado (Android)

Se aplica a: modo formación

Toque uno de los exámenes caducados de la lista para verlo. El examen caducado solo permite la lectura y debe eliminarse antes de iniciar otro examen. Antes de eliminar el examen caducado puede:

- Tocar una imagen para [Ver una imagen de un examen caducado \(Android\)](#).
- Tocar  para [Compartir un examen \(Android\)](#).

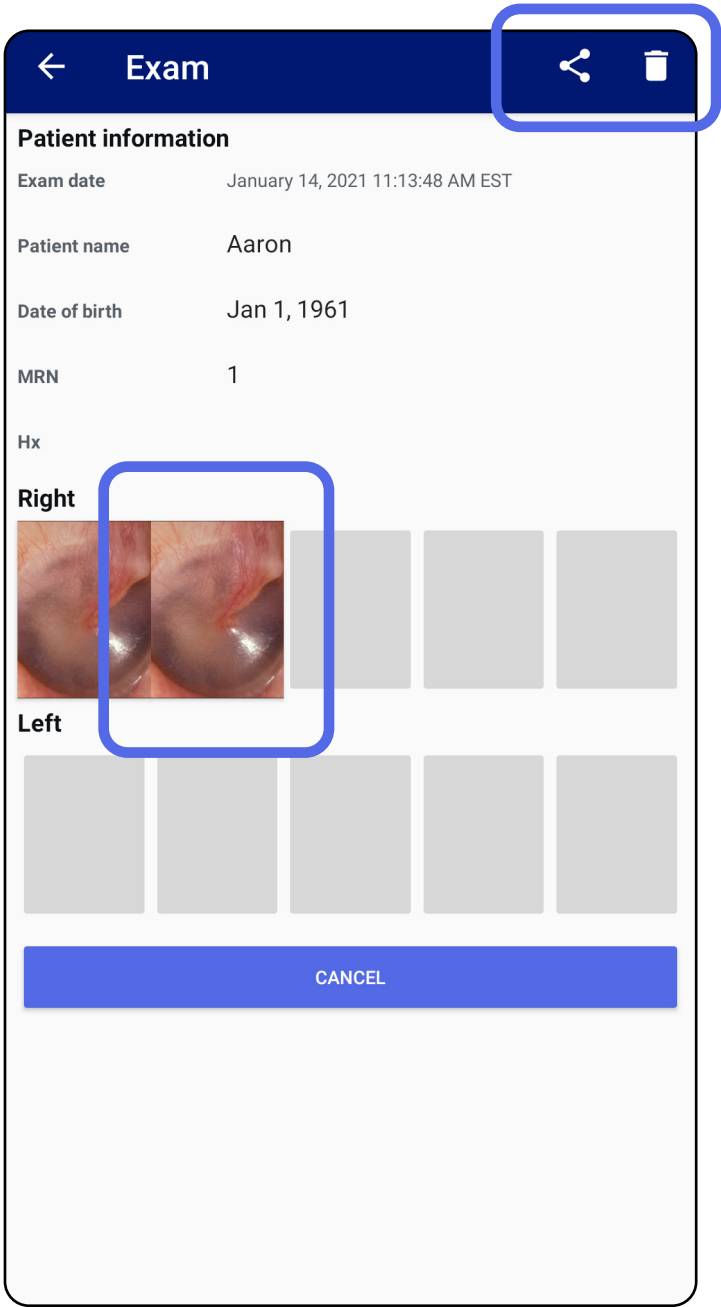


- Consulte [Eliminar un examen caducado \(Android\)](#).

## Ver una imagen de un examen caducado (Android)

*Se aplica a: modo formación*

En la pantalla Expired Exam (Examen caducado), toque una imagen para abrirla.

- Toque  para [Aplicar un filtro, mover y eliminar imágenes \(Android\)](#) en un examen caducado.
- Toque  para [Compartir una imagen \(Android\)](#) de un examen caducado.

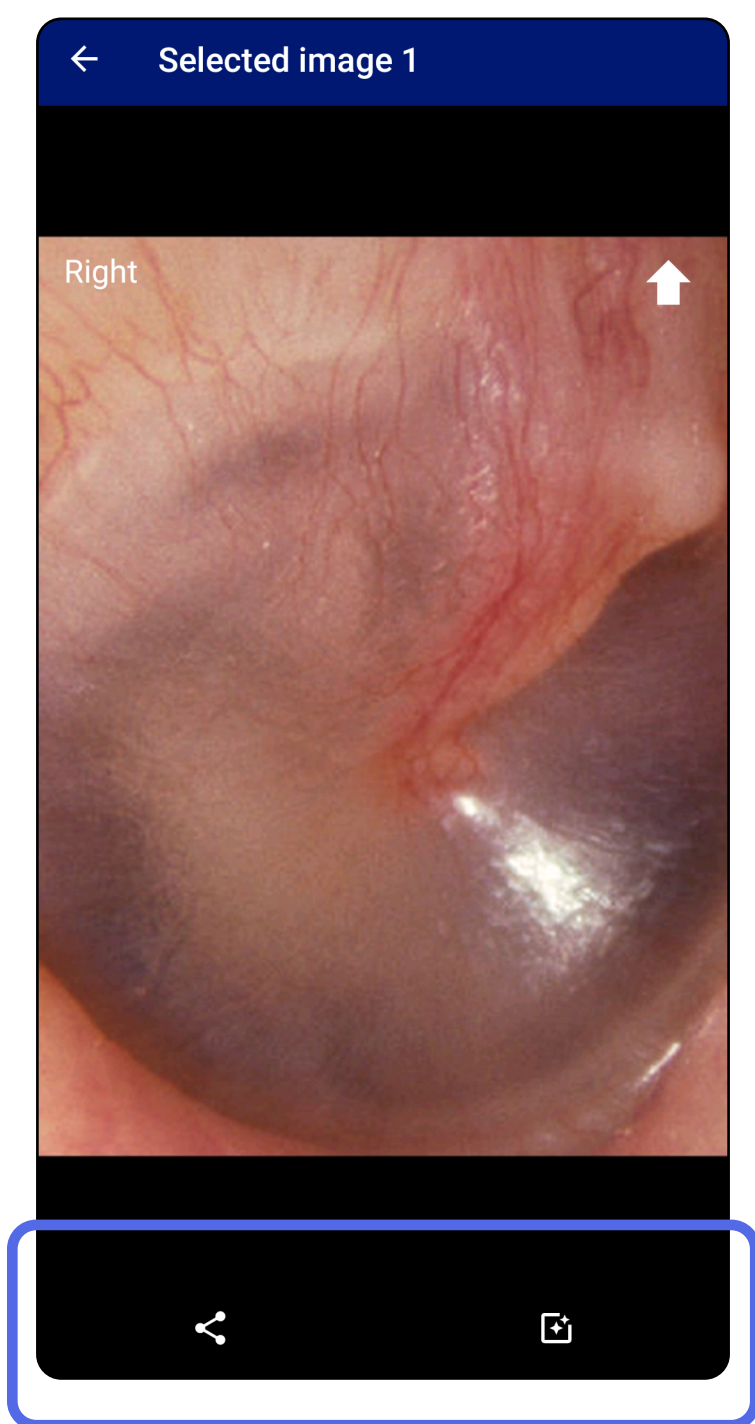


Ir a la lista *Uso de las funciones de la aplicación*

## Eliminar un examen caducado (Android)


*Se aplica a: modo formación*

Para eliminar todos los exámenes caducados:

1. Pulse ←.

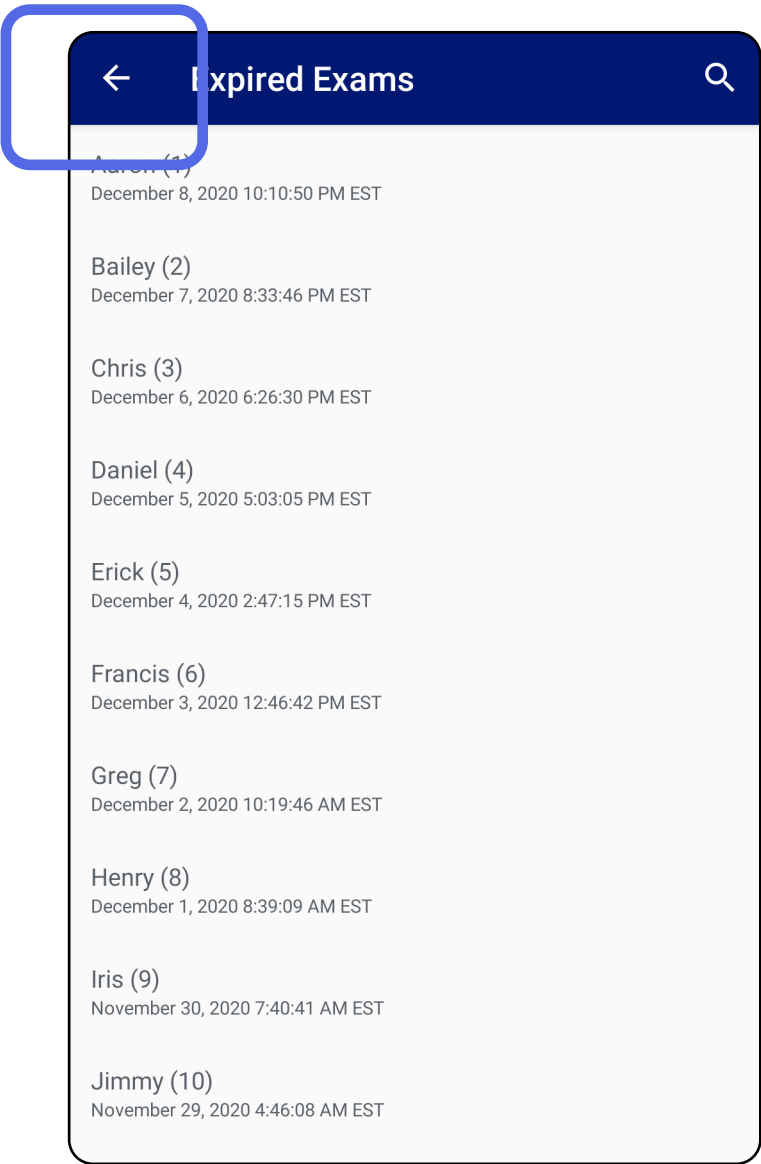


2. Toque **OK** (Aceptar) para confirmar en el cuadro de diálogo emergente.

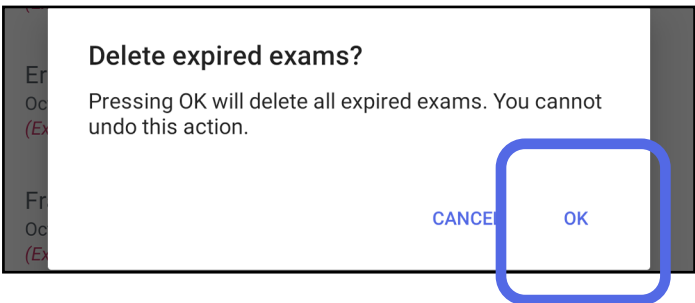

Hay 2 opciones para eliminar un examen caducado.


Opción 1: Deslizar para eliminar

Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el nombre del examen caducado.

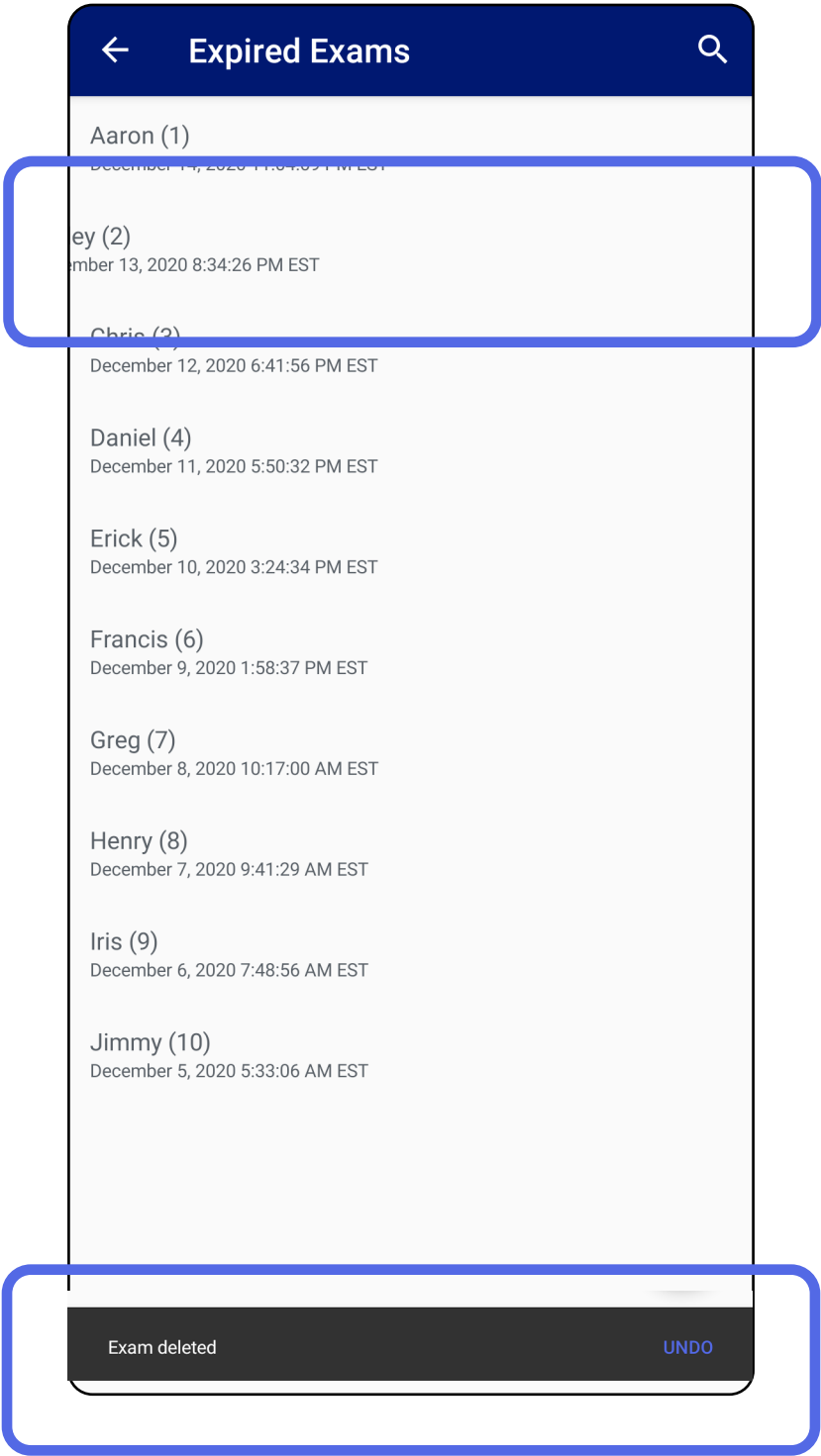

Toque **UNDO** (Deshacer) en 15 segundos en el diálogo emergente para deshacer la eliminación.

Opción 2: Seleccione el examen caducado y pulse  .

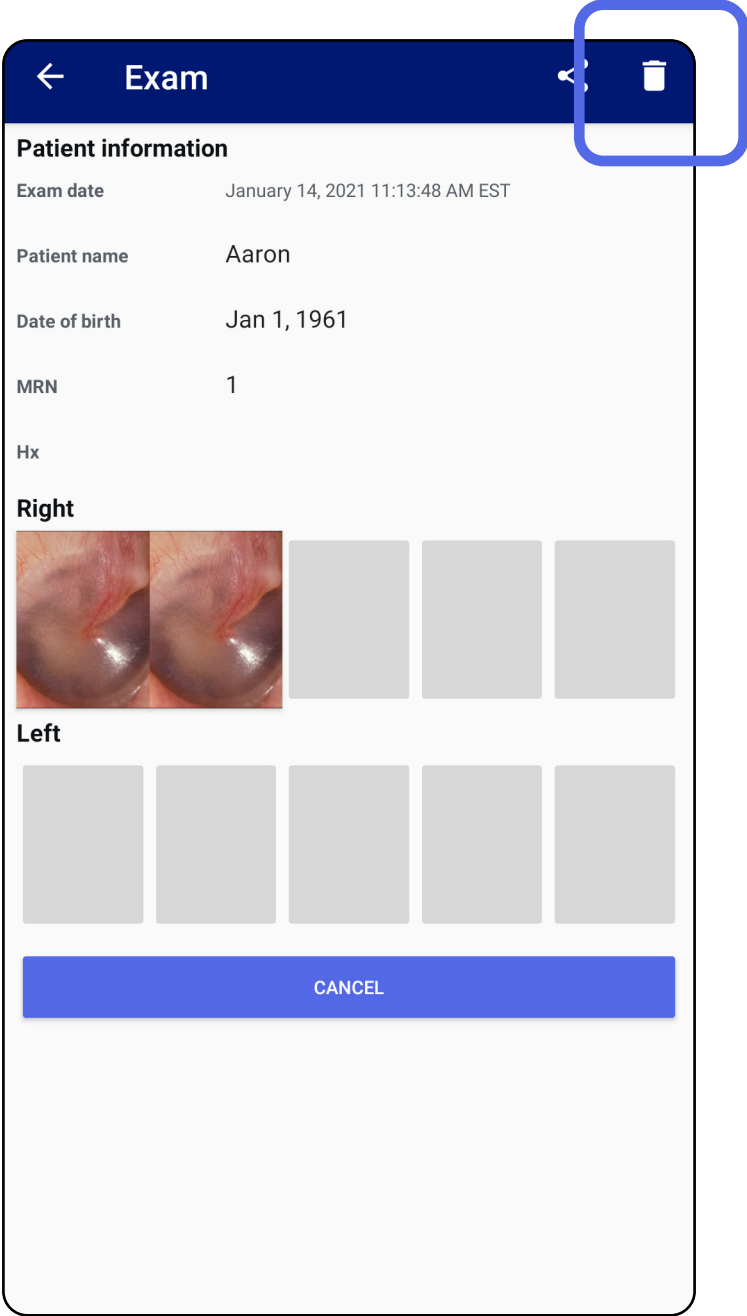


## Exámenes que caducan pronto (Android)

*Se aplica a: modo formación*

Cuando los exámenes caducan pronto, aparece el cuadro de diálogo “Exams expiring soon” (Exámenes que caducan pronto).


Toque **OK** (Aceptar) para revisar los exámenes que vayan a caducar.

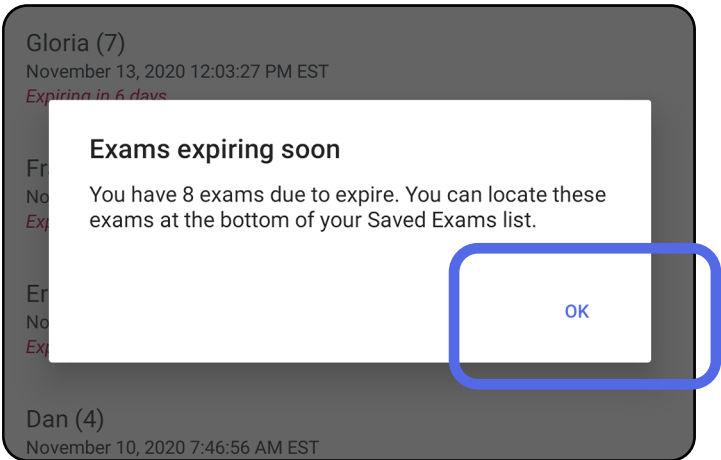

## Ver exámenes que caducan pronto (Android)

*Se aplica a: modo formación*

No es necesario realizar ninguna acción hasta que caduque un examen.

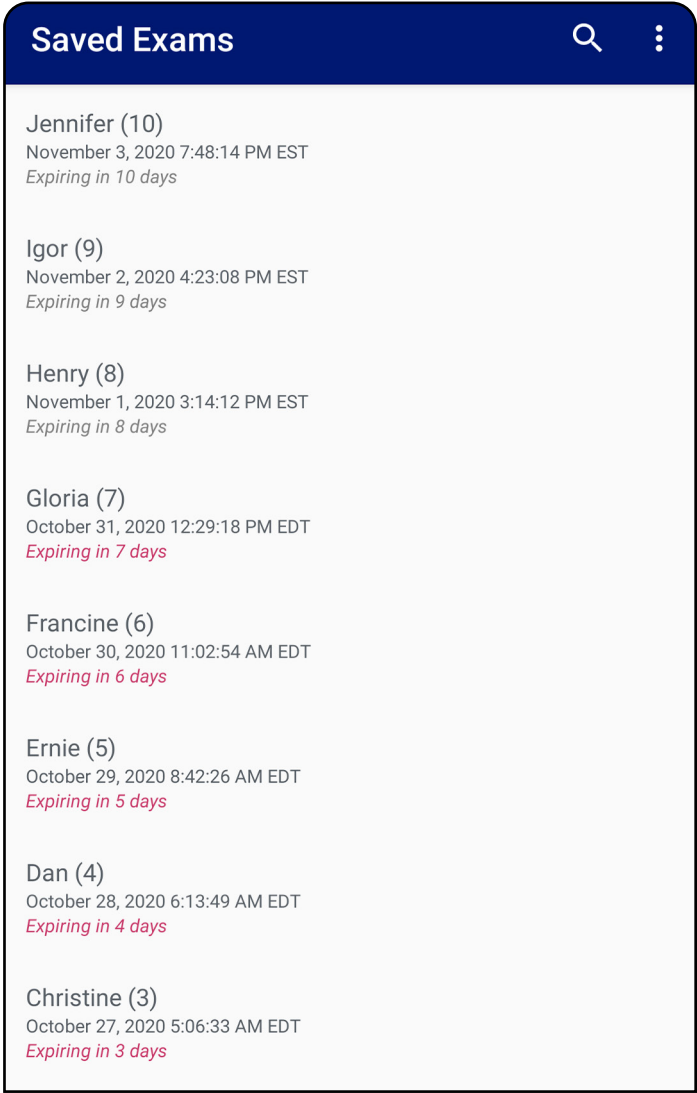


Ir a la lista *Uso de las funciones de la aplicación*

# Añadir un examen (Android)

*Se aplica a: modo formación*


- 1. Toque + para añadir un nuevo examen.
- 2. Consulte [Capturar imágenes \(Android\)](#).

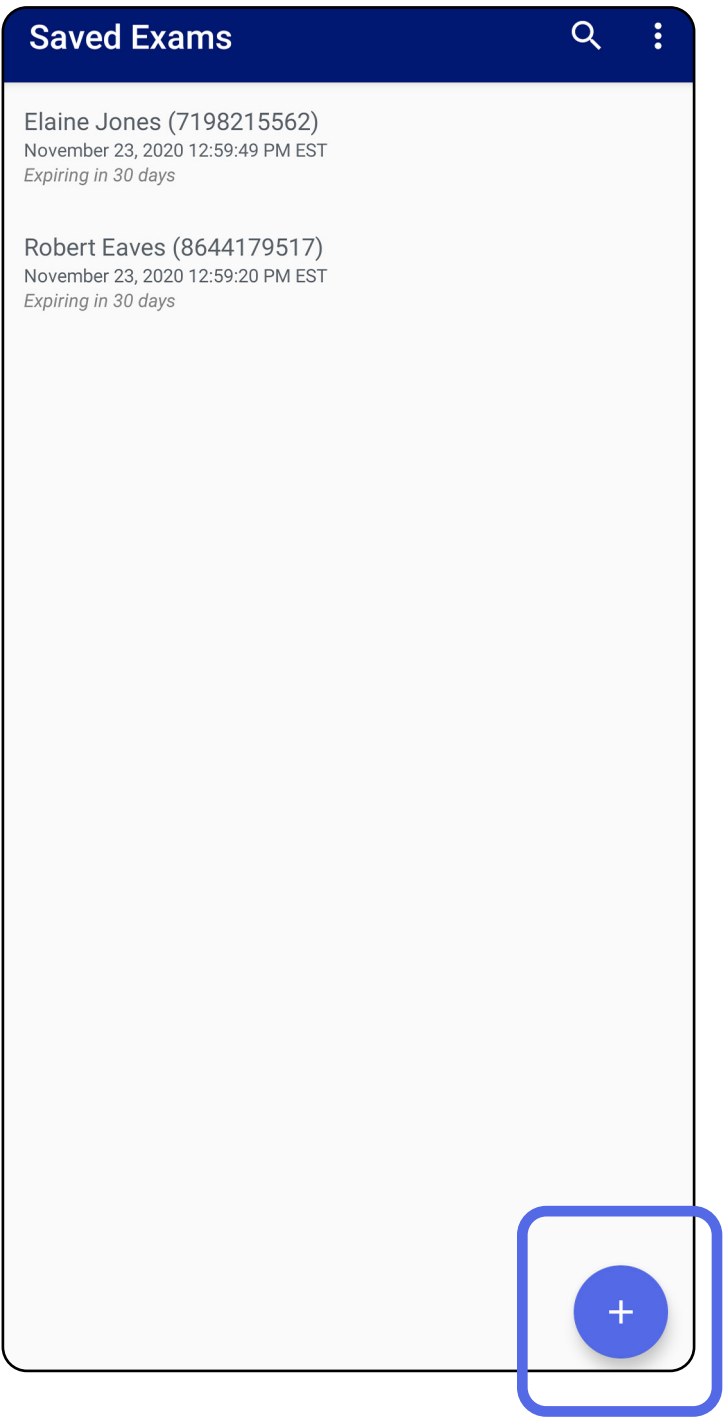


## Capturar imágenes (Android)

*Se aplica a: modo formación, modo clínico*

- 1. Coloque el dispositivo delante del lado seleccionado. Consulte los vídeos y otros materiales de formación en [hillrom.com](http://hillrom.com) para realizar un examen.
- 2. Toque **Add image** (Añadir imagen) para capturar imágenes del lado derecho o izquierdo.

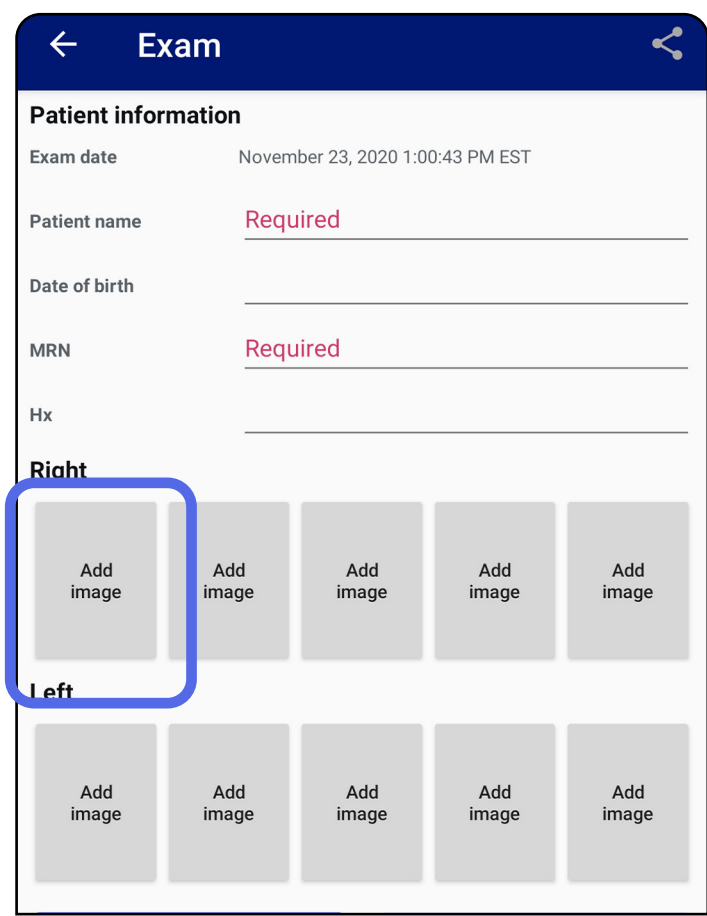

3. Cuando haya una grabación anterior del mismo lado, seleccione una opción del menú emergente para iniciar una grabación nueva **New recording** (Grabación nueva) o para guardar imágenes de una grabación anterior **Previous recording** (Grabación anterior). Consulte [Seleccionar imágenes \(Android\)](#).

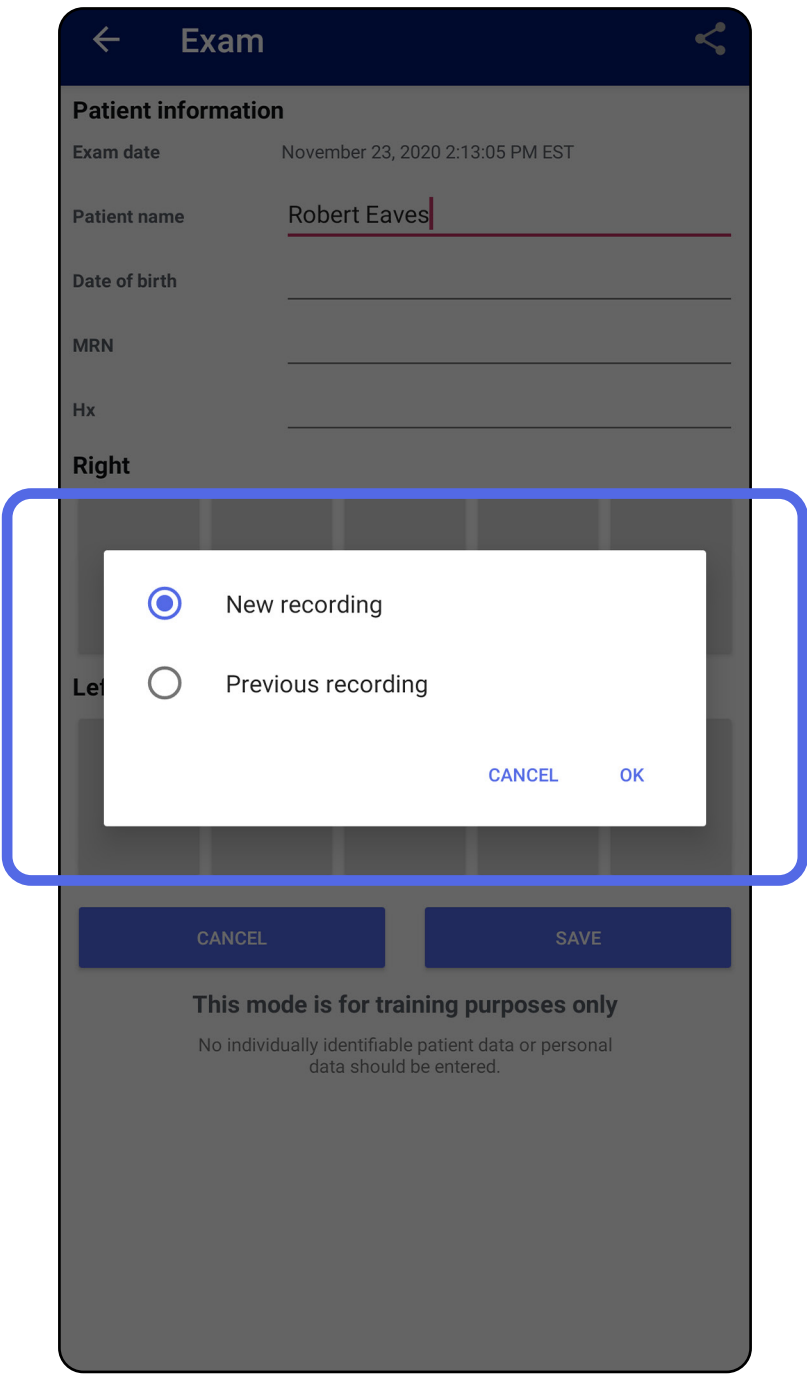

Cuando no haya ninguna grabación anterior en el mismo lado, la grabación se iniciará y se detendrá automáticamente. Consulte [Seleccionar imágenes \(Android\)](#).



## Seleccionar imágenes (Android)

*Se aplica a: modo formación, modo clínico*


1. Seleccione las imágenes que desea conservar utilizando los controles del reproductor de vídeo situados en la parte inferior. Utilice el control deslizante para localizar la imagen que desea conservar. Utilice los controles de retroceso, reproducción/pausa y avance para mover la selección fotograma a fotograma.
2. Toque **+** cuando desee guardar una imagen.
3. Pulse **✓** en la esquina superior derecha.



**NOTA** Se puede guardar un máximo de 5 imágenes por cada lado en un examen.



**NOTA** La flecha de la esquina superior derecha de la imagen indica la dirección hacia arriba de la imagen capturada.

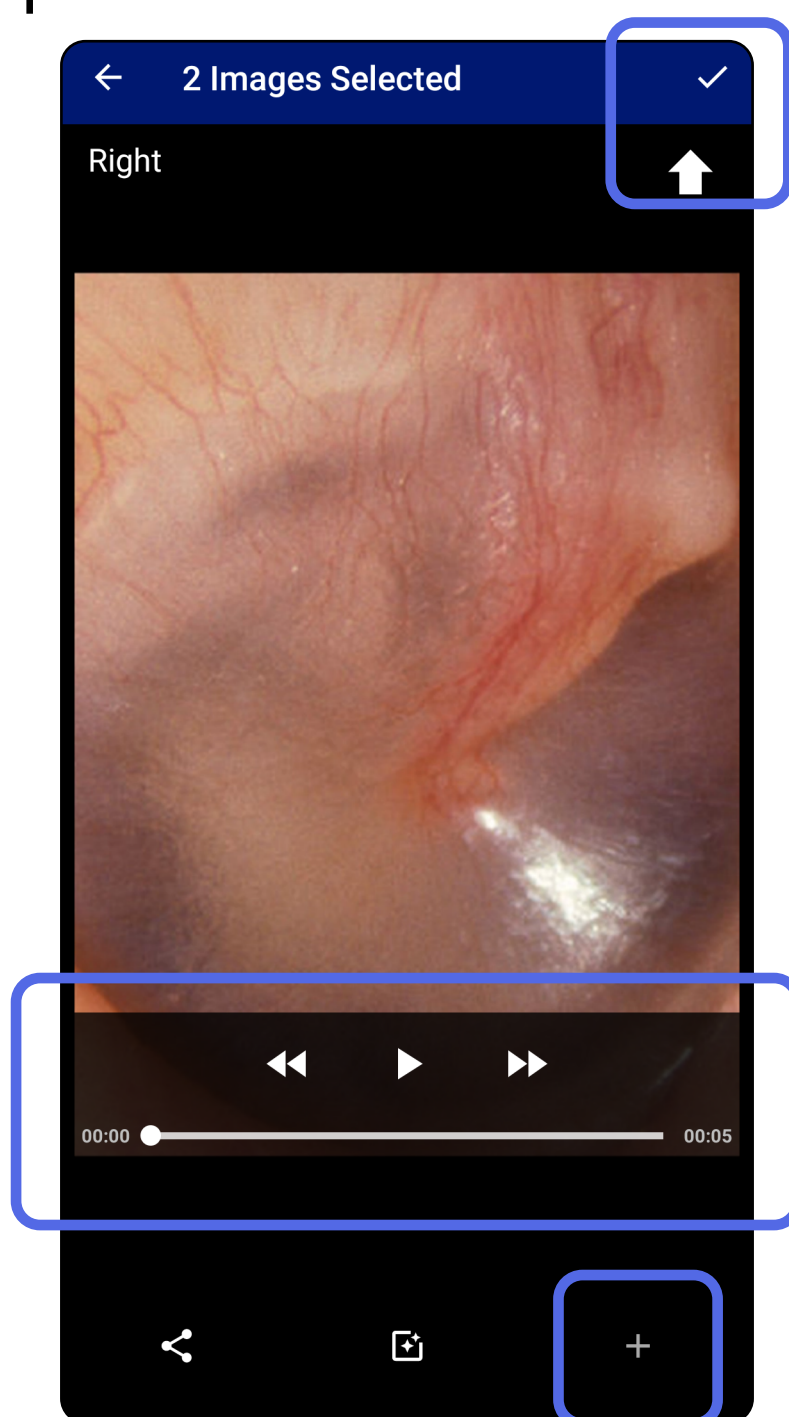

Ir a la lista *Uso de las funciones de la aplicación*


## Visualizar la imagen seleccionada (Android)

*Se aplica a: modo formación, modo clínico*

1. En la pantalla Exam (Examen), toque una imagen.
2. En la pantalla Selected image (Imagen seleccionada), deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazarse por todas las imágenes de ambos lados.



**NOTA** La flecha de la esquina superior derecha de la imagen indica la dirección hacia arriba de la imagen capturada.

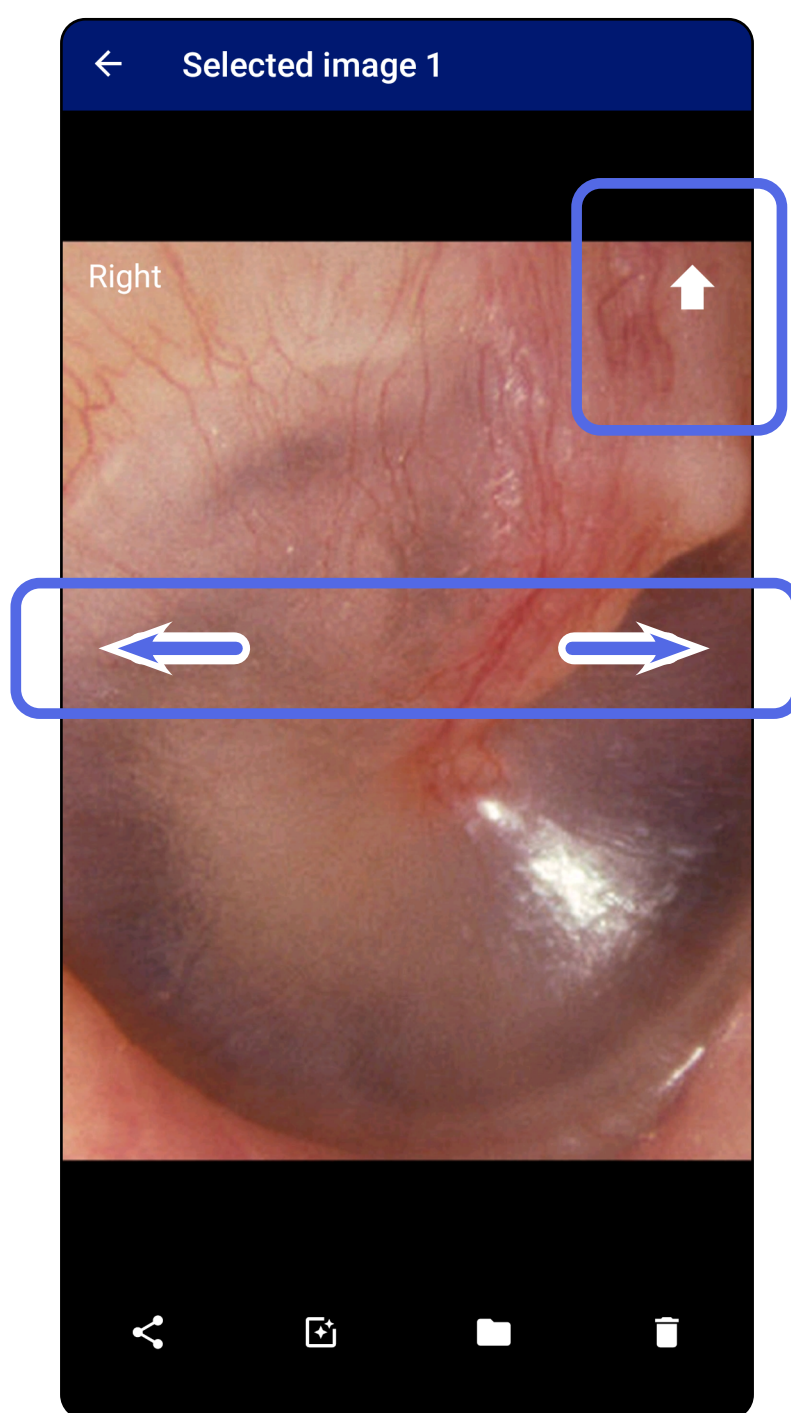


## Aplicar un filtro, mover y eliminar imágenes (Android)

*Se aplica a: modo formación, modo clínico*

En la pantalla Exam (Examen), toque una imagen para abrirla.

- Toque  para aplicar un filtro. Los filtros solo se aplican a la imagen actual y cuando esta se comparte. Se almacenan las imágenes originales sin filtrar.
- Toque  y, a continuación, toque OK (Aceptar) en el menú emergente para mover la imagen al otro lado (*no disponible en exámenes caducados*). Esta función resulta de utilidad si seleccionó el lado incorrecto al iniciar la captura de imagen.
- Toque  para eliminar la imagen y, a continuación, confirme la eliminación (*no disponible en exámenes caducados*).

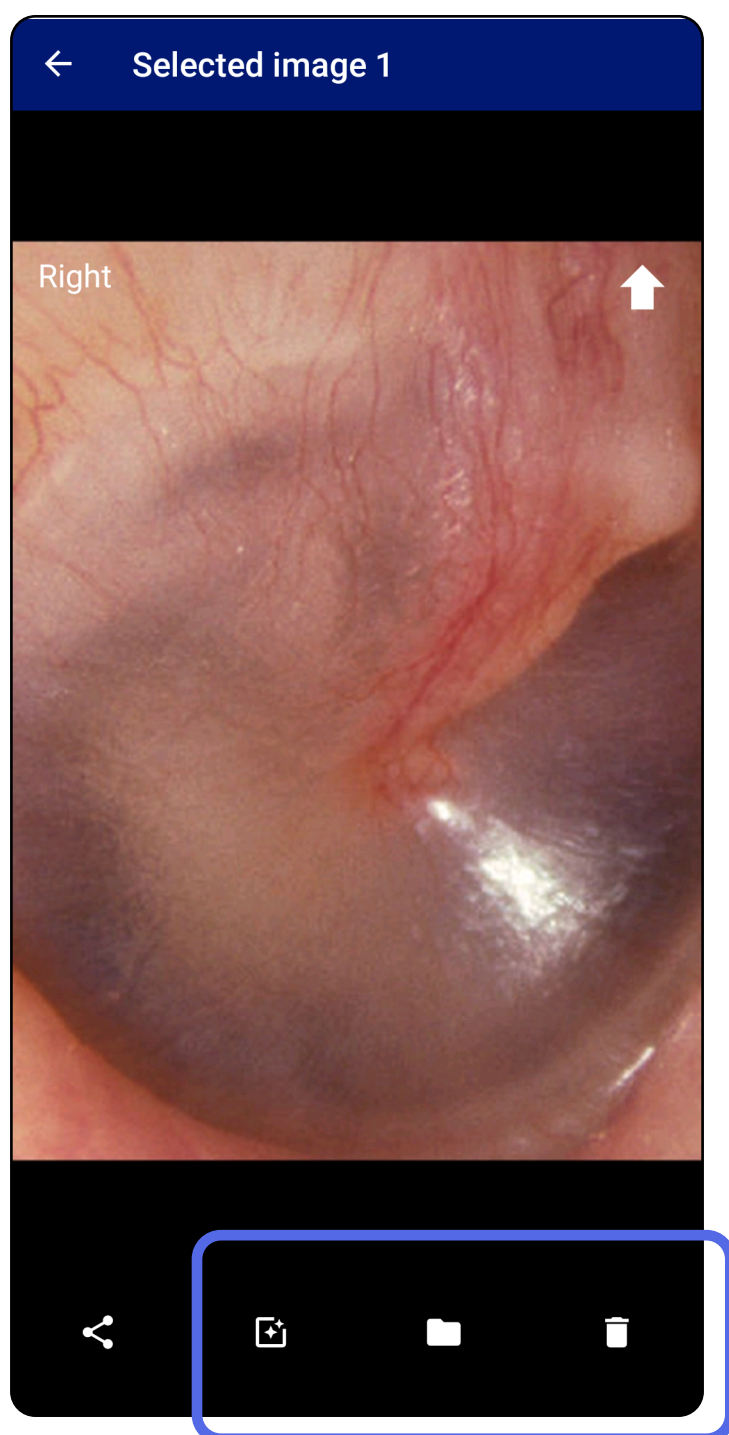

Ir a la lista *Uso de las funciones de la aplicación*

## Guardar un examen (Android)

*Se aplica a: modo formación*

- 1. Añada los detalles del paciente.
- 2. Pulse **Save** (Guardar).

 **NOTA** No es necesario que haya imágenes para guardar un examen. Los detalles del paciente se pueden añadir antes o después de seleccionar las imágenes.

 **NOTA** Los exámenes solamente se pueden guardar después de haber introducido los detalles obligatorios.

←

Exam

Patient information

Exam date

January 13, 2021 1:51:32 AM EST

Patient name

Andy

Date of birth

Jan 1, 1961


MRN

1

Hx

Hx1

Right

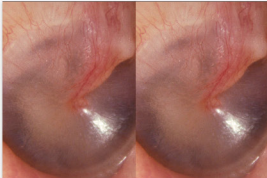

Add image

Add image

Add image

Left

Add image

Add image

Add image

Add image

Add image

CANCEL

SAVE


This mode is for training purposes only

No individually identifiable patient data or personal data should be entered.

# Actualizar un examen guardado (Android)

*Se aplica a: modo formación*



- 1. Para editar el examen, toque el nombre del examen que desee para abrirlo.

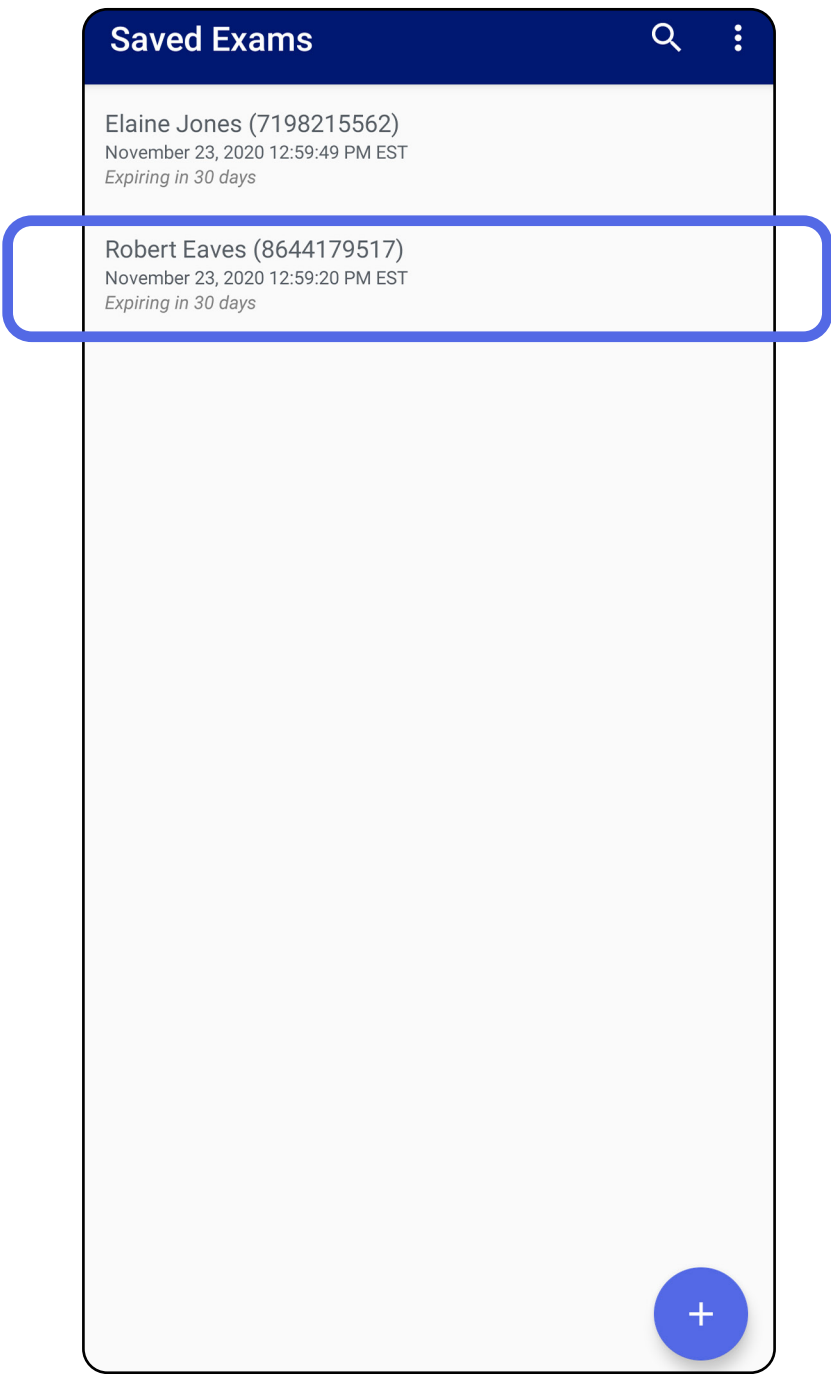

- 2. En la pantalla Exam (Examen), toque el campo que desea actualizar.

- 3. Introduzca la información del paciente.
  - a. Utilice el teclado emergente o el teclado numérico para rellenar los campos Patient name (Nombre del paciente) o MRN (número de la historia clínica).
  - b. Utilice el calendario emergente para seleccionar una fecha de nacimiento.

 **NOTA** El estilo del calendario variará en función de la versión de **Android**.

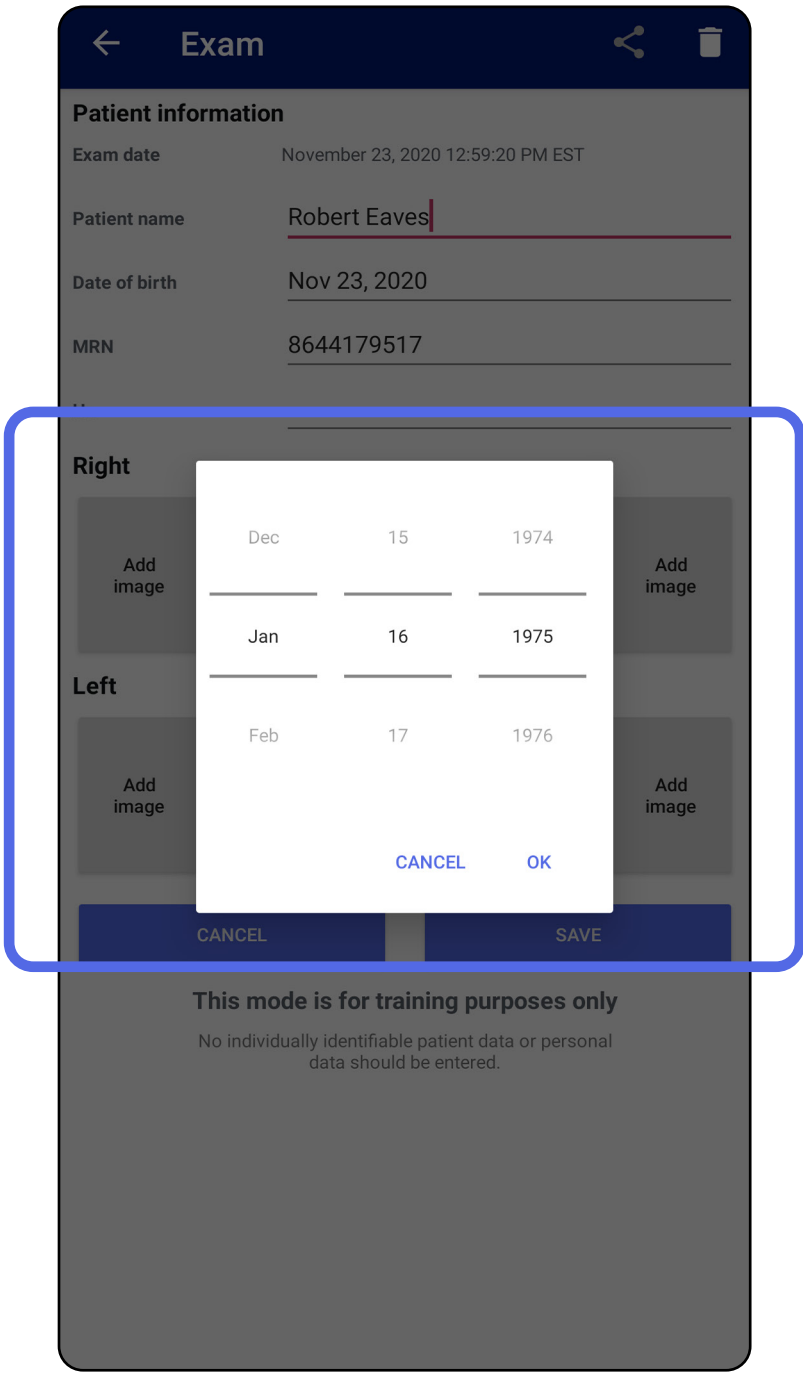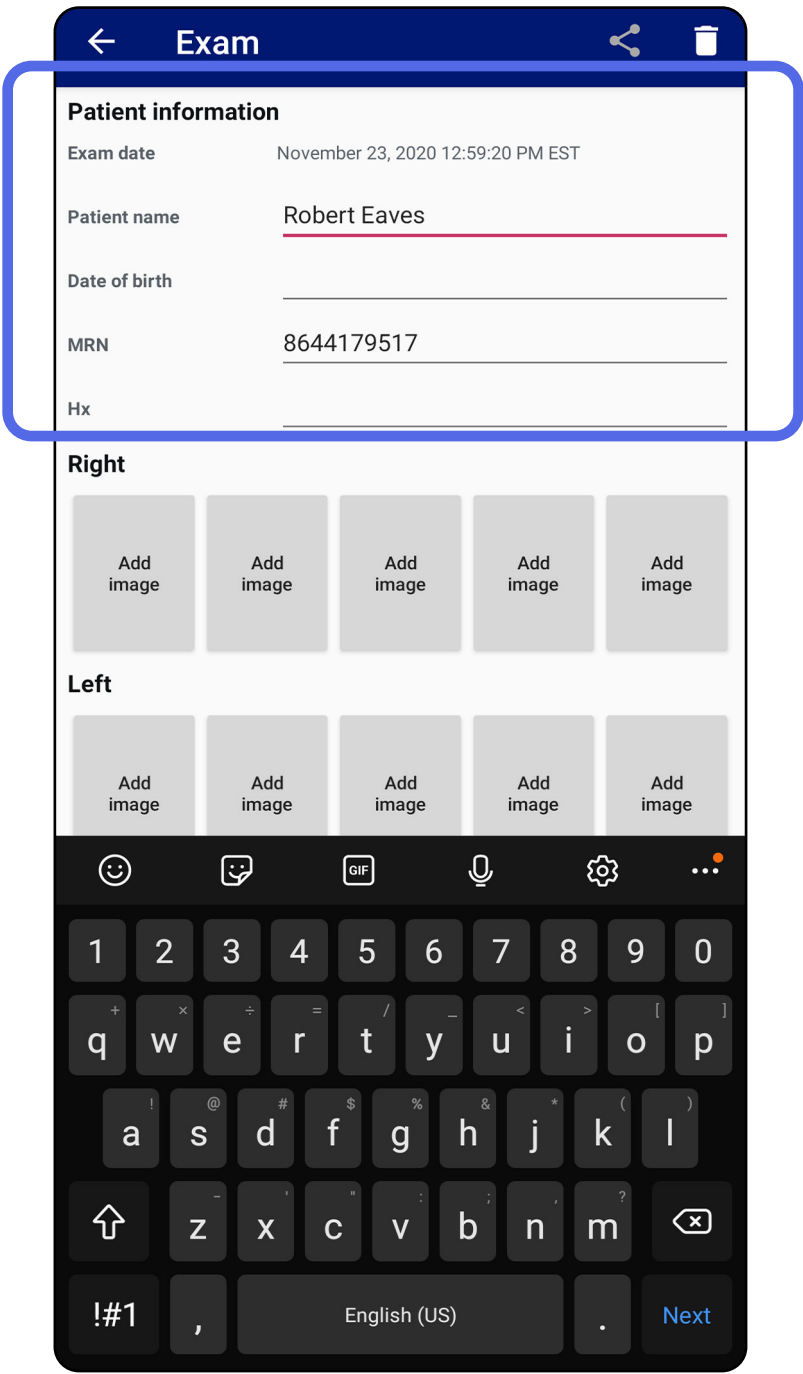

- 4. Añada o elimine imágenes. Consulte [Capturar imágenes \(Android\)](#) y [Aplicar un filtro, mover y eliminar imágenes \(Android\)](#).
- 5. Toque **Save** (Guardar).

 **NOTA** Solo está disponible la opción de guardar cuando se han realizado cambios y se han completado los datos obligatorios del paciente.


## Compartir un examen (Android)

*Se aplica a: modo formación, modo clínico*


1. En la pantalla Exam (Examen), toque .
2. Seleccione el método de compartir en el menú emergente.



**NOTA** El icono para compartir solo está disponible cuando hay al menos una imagen y se han completado los detalles del paciente obligatorios en el examen.

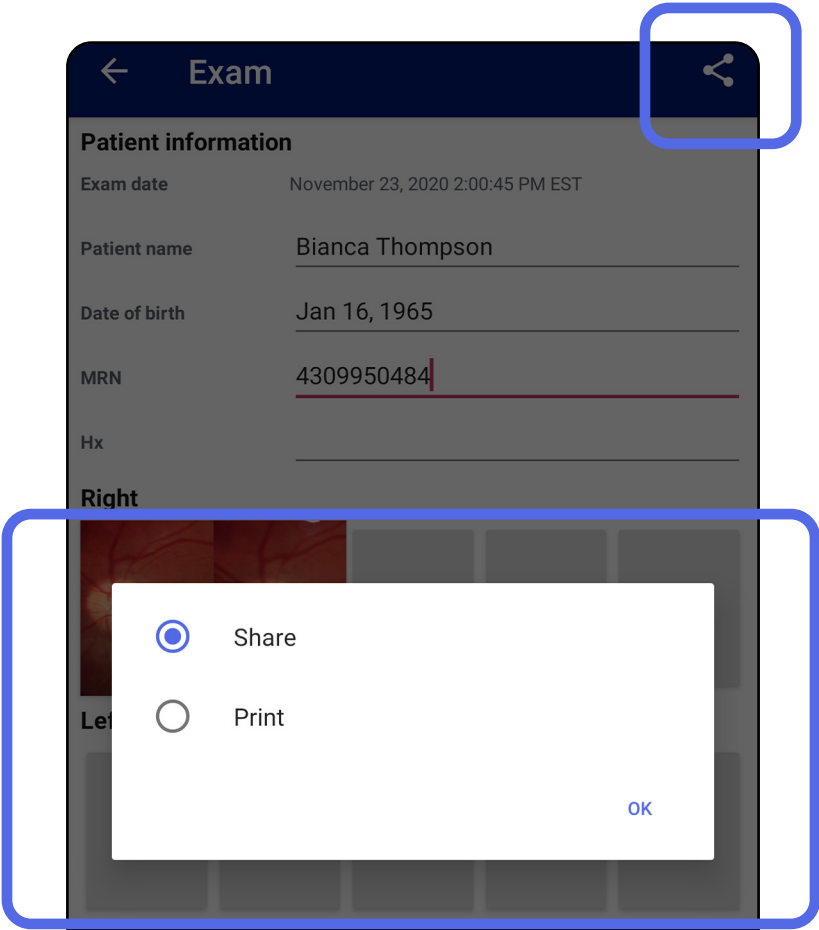

- 3. Siga las indicaciones para compartir.

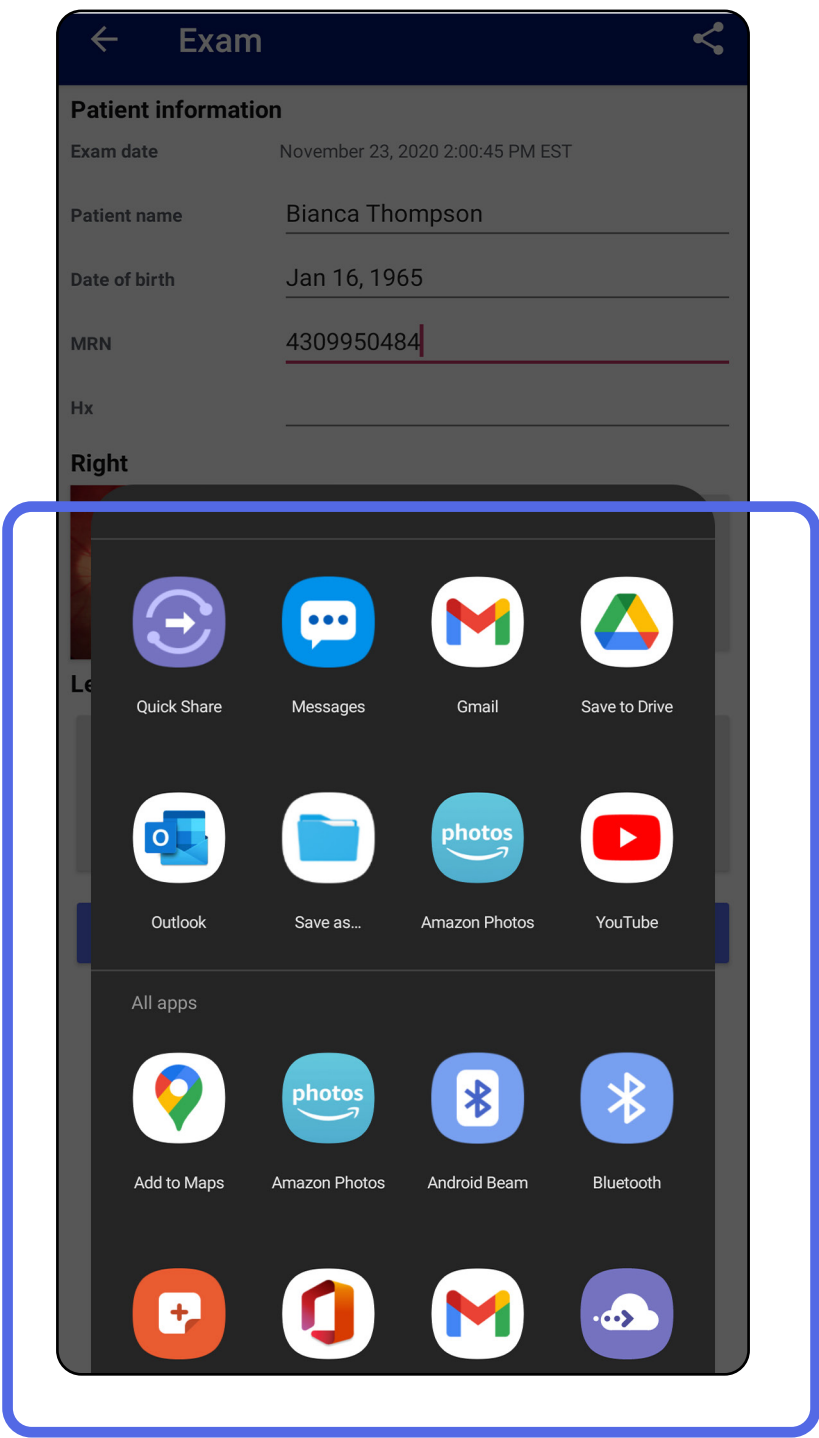

 **NOTA** Consulte [Datos y seguridad del dispositivo y del paciente.](#)

 **NOTA** Las imágenes compartidas de la aplicación **iExaminer** pueden tener información incrustada. Algunas aplicaciones de visualización de fotografías no admiten información incrustada. Si el destinatario no puede ver la fotografía, debe comprobar que la aplicación de visualización de fotografías admite la visualización de imágenes con información incrustada o seleccionar otra aplicación de visualización de fotografías.


## Compartir una imagen (Android)

*Se aplica a: modo formación, modo clínico*


1. En la pantalla Exam (Examen), toque la imagen que desee.
2. Pulse .



**NOTA** La opción de compartir está disponible cuando se han completado los detalles del paciente obligatorios en el examen.

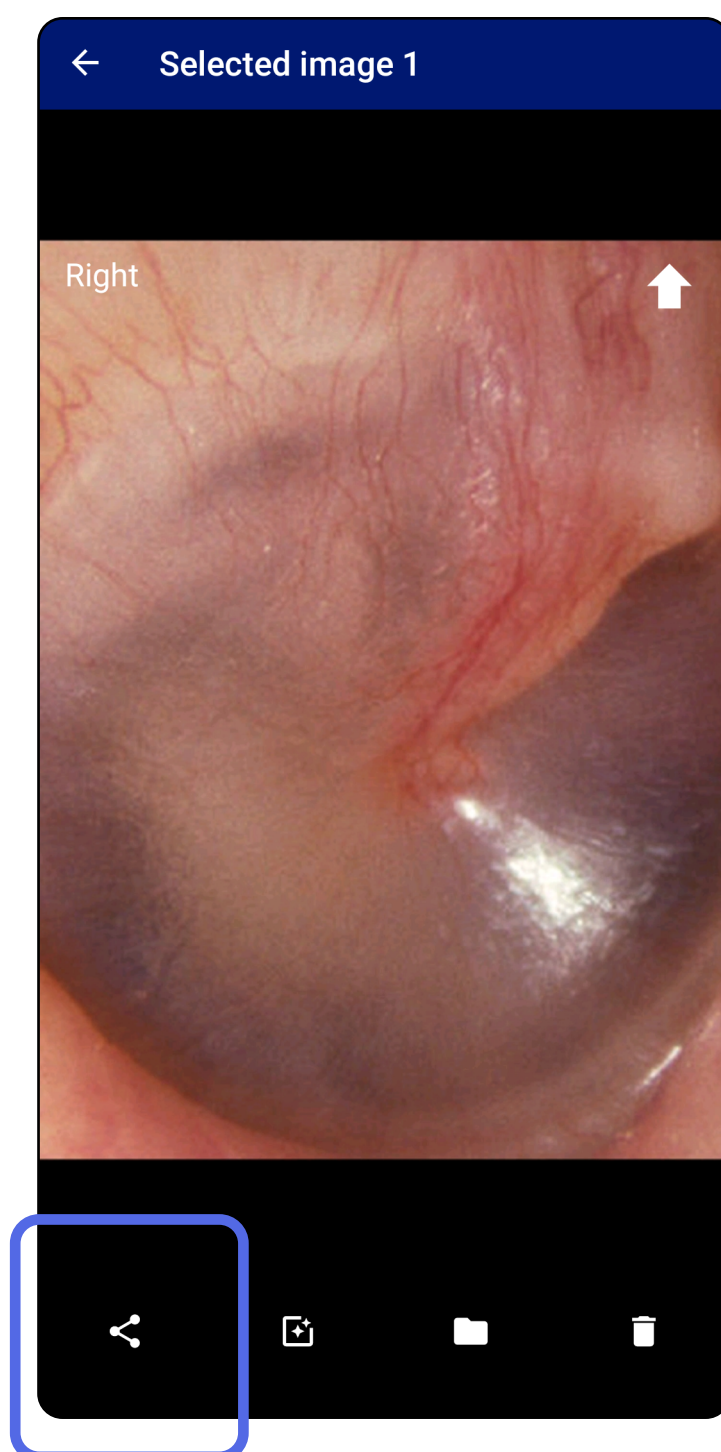

3. Seleccione el método de compartir en el menú emergente.

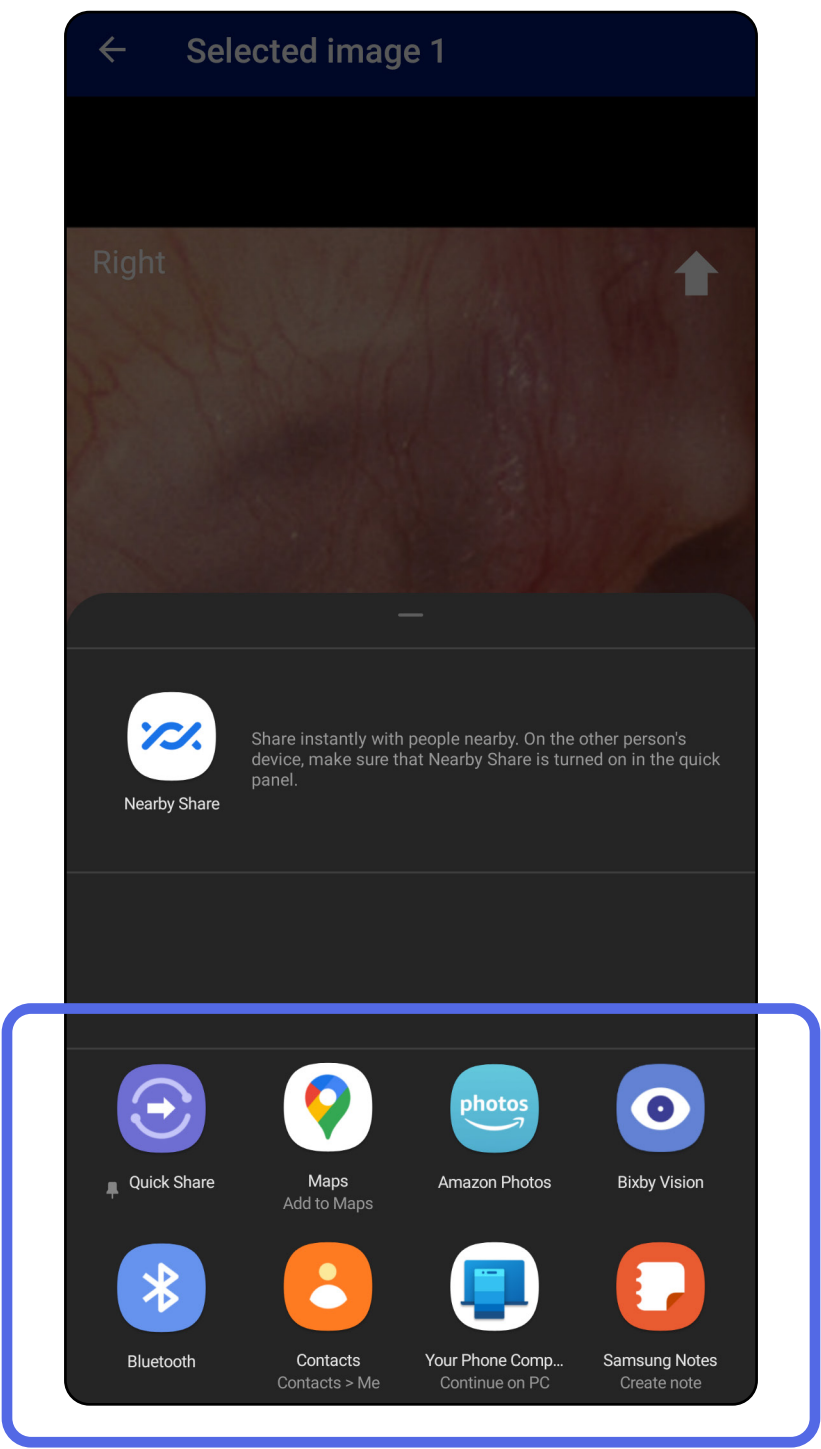

4. Siga las indicaciones para compartir.


 **NOTA** Consulte [Datos y seguridad del dispositivo y del paciente](#).

 **NOTA** Las imágenes compartidas de la aplicación **iExaminer** pueden tener información incrustada. Algunas aplicaciones de visualización de fotografías no admiten información incrustada. Si el destinatario no puede ver la fotografía, debe comprobar que la aplicación de visualización de fotografías admite la visualización de imágenes con información incrustada o seleccionar otra aplicación de visualización de fotografías.

## Eliminar un examen (Android)

*Se aplica a: modo formación*

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha sobre el nombre del examen caducado.

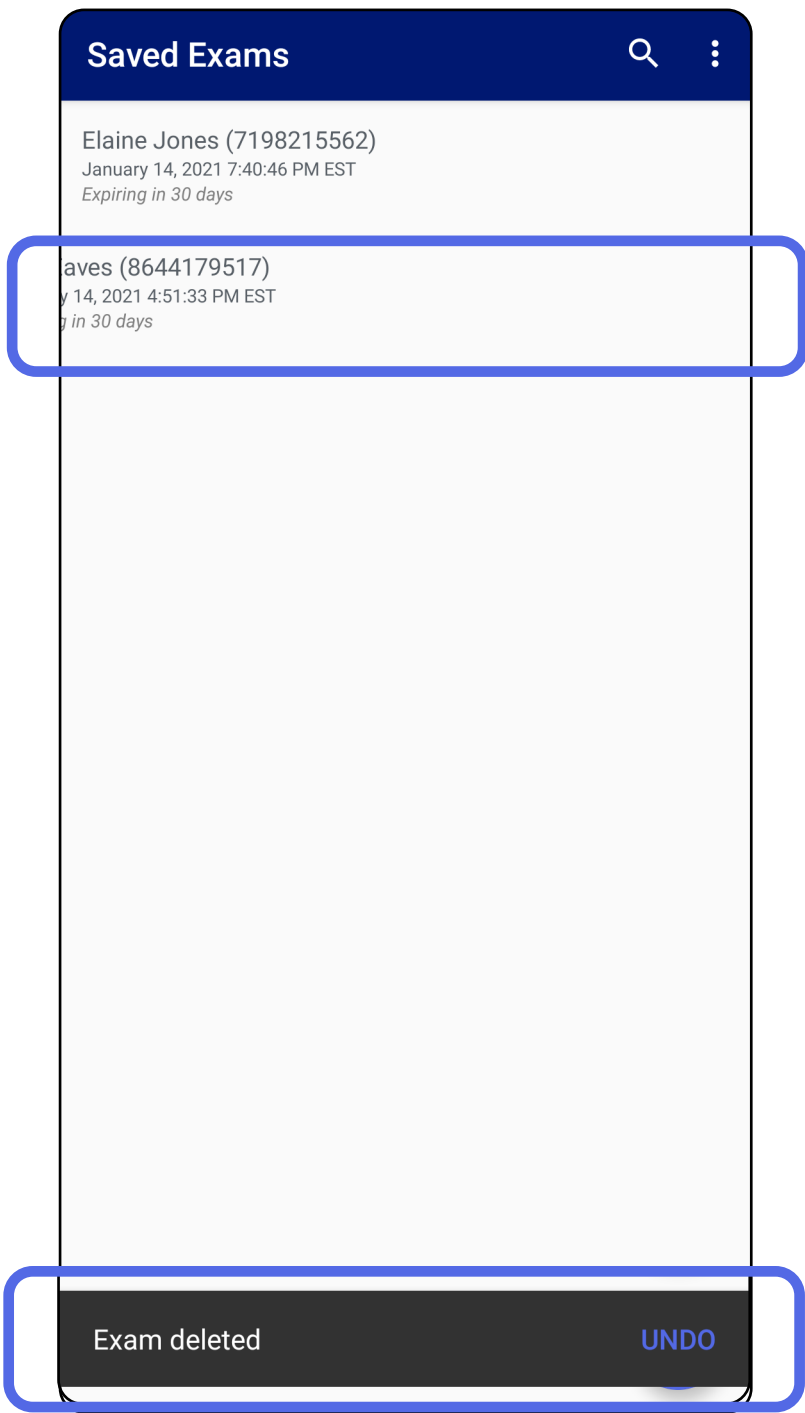


Toque **UNDO** (Deshacer) en 15 segundos en el diálogo emergente para deshacer la eliminación.

## Descartar un examen (Android)

*Se aplica a: modo clínico*

1. Para descartar el examen, toque **New** (Nuevo).

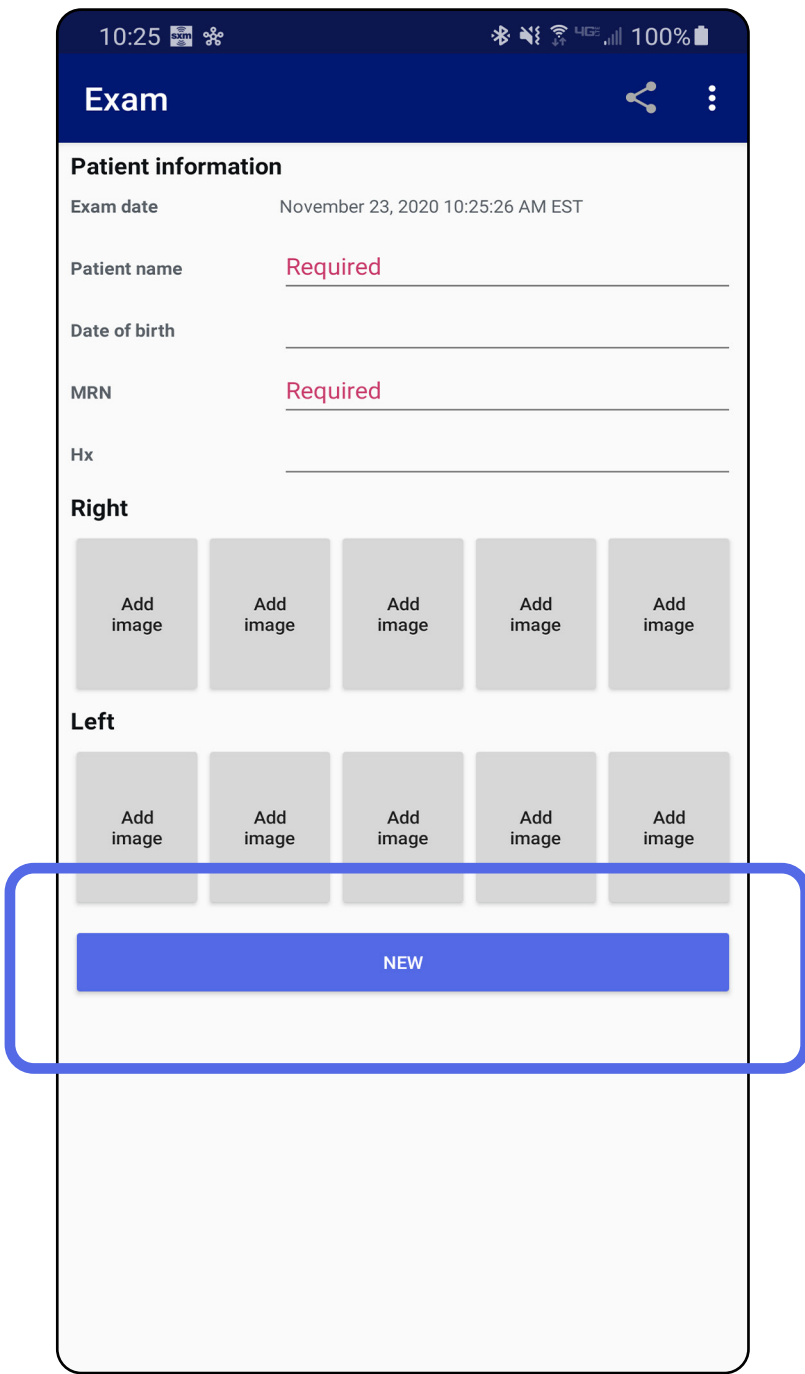

2. Toque **OK** (Aceptar) para descartar los cambios e iniciar un nuevo examen.

## Limpieza

Estas instrucciones de limpieza son para **SmartBracket** y **SmartClip**. Consulte las instrucciones de uso correspondientes para reutilizar los dispositivos de Welch Allyn.

 **PRECAUCIÓN** No esterilice ni sumerja en ninguna solución el **SmartBracket** ni el **SmartClip**.

Aparte de la limpieza del producto, no se requiere ningún mantenimiento preventivo.

Productos químicos de limpieza aprobados:

- Alcohol isopropílico al 70 % (por ejemplo, toallitas con alcohol **CiDehol** 70)
  - **Metrex CaviWipes**
  - PDI Super-**Sani-Cloth**
  - PDI-**Sani-Cloth** Plus
1. Retire el **SmartBracket** del cabezal y el **SmartClip** antes de limpiarlos. Deje el **SmartClip** conectado a la funda.
  2. Utilice productos químicos de limpieza aprobados (consulte más arriba) para limpiar el **SmartBracket** y el **SmartClip** y eliminar toda la suciedad visible e invisible. Frecuencia: Limpie según sea necesario.
  3. Deje que la solución de limpieza se seque.

## Eliminación segura

**SmartBracket** y **SmartClip** deben eliminarse de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Siga las instrucciones de limpieza de acuerdo con las instrucciones de esta sección del manual de usuario.
2. Como preparación, separe el material para el proceso de reciclaje.
  - Los componentes se deben desmontar y reciclar según el tipo de material.
    - o El plástico ha de desecharse como residuo plástico.
    - o El metal ha de desecharse como residuo metálico.
  - Incluye tornillos y fijaciones.

Consulte las instrucciones de uso correspondientes de los cabezales para saber cómo desecharlos.

Siga las instrucciones del fabricante para desechar el smartphone y la funda. Elimine todos los datos existentes relacionados con los pacientes, el hospital, la clínica o el médico para preservar la confidencialidad. La copia de seguridad de los datos se puede realizar antes de su eliminación.

Los usuarios deben cumplir todas las leyes y las normativas federales, estatales, regionales o locales relativas a la eliminación segura de los productos sanitarios y los accesorios médicos. En caso de duda, el usuario del dispositivo debe, en primer lugar, ponerse en contacto con el servicio técnico de Hillrom para que le orienten sobre los protocolos de eliminación segura.

## Compatibilidad electromagnética (EMC)

Si desea información sobre compatibilidad electromagnética (EMC), consulte la página web de Hillrom: [hillrom.com](http://hillrom.com).

## Almacenamiento y transporte

Consulte las instrucciones de uso correspondientes del dispositivo de Welch Allyn.

## Accesorios

Consulte las instrucciones de uso correspondientes del dispositivo de Welch Allyn para los accesorios y las partes aplicadas.

## Dispositivos compatibles

Consulte las instrucciones de uso correspondientes del dispositivo de Welch Allyn.

## Garantía

Welch Allyn, Inc. garantiza que Welch Allyn iExaminer SmartBracket y SmartClip no presentan defectos de origen de mano de obra o material y que funcionan de acuerdo con las especificaciones del fabricante durante un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Si este instrumento está defectuoso o no cumple las especificaciones del fabricante durante el periodo de garantía, Welch Allyn reparará o sustituirá el instrumento o componente sin coste alguno para el comprador. Esta garantía solo se aplica a los dispositivos Welch Allyn iExaminer SmartBracket y SmartClip comprados nuevos a Welch Allyn o a sus distribuidores o representantes autorizados. El comprador debe devolver el SmartBracket y SmartClip directamente a Welch Allyn o a un distribuidor o representante autorizado y asumir los gastos de envío.

Esta garantía no cubre las roturas ni los fallos debidos a la manipulación del instrumento, un mal uso, un uso negligente, los accidentes, las modificaciones o los envíos. Esta garantía quedará anulada si el instrumento no se utiliza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante o si se repara.