

TA 270 Tavolino servitore

Ergonomico, affidabile e sicuro
per voi e per i vostri pazienti



Un rapido sguardo:

- Massima stabilità in tutte le circostanze.
- Estrema solidità; manutenzione semplice e rapida.
- Meccanismo di regolazione di semplice utilizzo.
- Protezione totale per i vostri pazienti grazie al sistema Autolift®.
- Design moderno ed elegante, coordinato con la linea di arredi Meltis® di Hill-Rom.

Ottimizzate e proteggete il vostro ambiente di lavoro e l'ambiente dei vostri pazienti

Allo scopo di facilitare i compiti quotidiani dell'operatore sanitario, Hill-Rom ha progettato una generazione innovativa di tavolini servitore ergonomici e funzionali.

Pratico e facile da usare, il tavolino servitore TA 270 continua ad incrementare il comfort e il benessere del paziente.

Inoltre, il design moderno del pannello superiore garantisce estrema solidità e consente un'ampia scelta di colori.




TA 270 Tavolino servitore

Ergonomico, affidabile e sicuro per voi e per i vostri pazienti.

Sicurezza funzionale

Il sistema Autolift® garantisce una sicurezza ottimale, riducendo il rischio di intrappolamento e di ribaltamento. Il pannello superiore può essere elevato e bloccato in posizione con una semplice spinta.

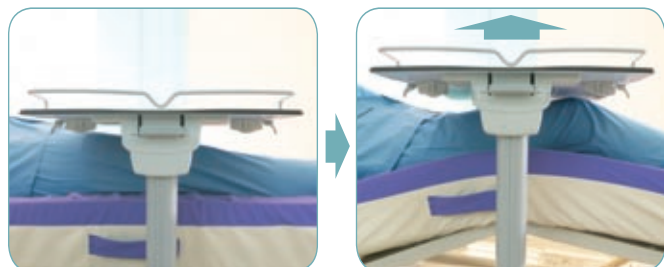

Dati tecnici

- La piastra di supporto della colonna, della base e del pannello superiore del tavolo è in acciaio protetto da rivestimento epossidico di color grigio metallo.
- Tutte le parti in plastica sono in ABS grigio.
- 4 ruote orientabili a doppio scorrimento con diametro di 50 mm.

Dimensioni:

- Altezza regolabile 73 / 108 cm
- Base anteriore con ruote 31 cm
- Base simmetrica a forma di H 94 x 49 cm
- Pannello TA270 FT (tavolino fisso) 96 x 45 cm
- Pannello TA270 TT (tavolino inclinato) (22 x 45) + (22 x 74) cm
- Rotazione angolare per il pannello superiore inclinato +/- 30° (rotazione completa possibile)
- Spessore del pannello superiore in resina 8 mm (penetrazione di umidità impossibile)
- Spessore del pannello superiore e del supporto 5,5 cm
- Carico di lavoro sicuro:
al centro del pannello superiore 30 kg
stabilità in qualunque punto 16 kg

www.hill-rom.com

France+33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom+44 (0)1530 411000
 Deutschland +49 (0)211/16450-0
 Nederland+31 (0)347 32 35 32
 Italia +39 02-950541

Suisse/Schweiz +41 (0)21/706 21 30
 (deutschsprachig)021/706 21 38
 Österreich +43 (0)2243 / 28550
 Ireland +353 (0)1 413 6005
 Iberia +34 (0)93 6856000

Nordic Countries+46 (0)8 564 353 60
 Exportcontact your local Hill-Rom distributor
or contact your Area manager via website
 or call +1 812 934 8173

Hill-Rom si riserva il diritto di effettuare modifiche al design, alle specifiche e ai modelli senza obbligo di preavviso. L'unica garanzia offerta da Hill-Rom è l'espressa garanzia scritta che copre la vendita e il noleggio dei suoi prodotti. Fabbricato da Hill-Rom SAS - Pluvigner, Francia © 2007 Hill-Rom Services, Inc. - TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Design ergonomico

Con la sua base a forma di H, il tavolino TA 270 è compatibile con ogni ambiente di cura e conserva, allo stesso tempo, la massima stabilità.



La ridotta profondità della base anteriore consente al tavolino di essere posizionato in qualsiasi punto della stanza del paziente e anche sotto i letti provvisti di quinta ruota.

Gli angoli arrotondati vi guidano facilmente alle maniglie di comando e contribuiscono a creare un design raffinato ed elegante.



Posizione di lettura

Posizione di lettura ideale per i vostri pazienti, grazie ai pannelli superiori in resina inclinabili fino a 30°.



Manutenzione semplificata

Il pannello superiore facile da pulire e interamente girevole facilita notevolmente il processo di pulizia.



Pannello fisso

Scegliete un pannello superiore fisso o regolabile a seconda delle vostre esigenze.



USA & Canada
 Western & Eastern Europe
 Middle East / Africa /
 Indian Sub-Continent
 Asia Pacific

Hill-Rom
 A HILLENBRAND INDUSTRY