


Past zich aan, efficiënte en veilige decubitus preventie

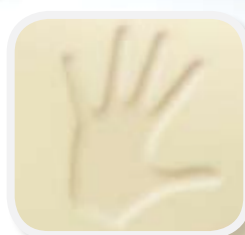

- Temperatuurgevoelig visco-elastisch foam
- Past zich aan de lichaamsvorm aan en vermindert de interface druk
- Zeer comfortabel, het matras heeft een lange levensduur
- Gelaste hoes met ingebouwde handgrepen
- Eenvoudig te reinigen en zeer hygiënisch
- De zijkanten met een hoger soortelijk gewicht zijn ontworpen voor de veiligheid van de patiënt en vermakkelijken het in en uit bed stappen
- Geschikt voor de meeste bedframes en past zich aan iedere bedpositie aan

Hill-Rom NP150 Visco-elastisch matras Temperatuurgevoelig, visco-elastisch foammatras

Hill-Rom

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Hill-Rom NP150 Visco-elastisch matras

Temperatuurgevoelig, visco-elastisch foammatras



Het Hill-Rom NP150 visco-elastisch matras is speciaal ontwikkeld om decubitus te helpen voorkomen. Het temperatuurgevoelige visco-elastische foam past zich aan de lichaamsvorm van de patiënt aan en verspreidt het gewicht gelijkmatig in iedere positie. Dit draagt bij aan het comfort van de patiënt en een goede drukverdeling. Het is geschikt voor de meeste bedframes.

De polyurethaan hoes is waterproof, waterdampdoorlatend, multistretch, bacterie- en schimmelwerend, eenvoudig te reinigen en te desinfecteren, zodat een maximale hygiëne voor patiënten en zorgverleners wordt verzekerd.

Technische gegevens

Matras (andere afmetingen op maat beschikbaar):

Lengte.....	198 cm
Breedte.....	85 of 90 cm
Hoogte.....	14 cm
Gewicht.....	8.8 kg

Soortelijk gewicht:..... 55 kg/m³

Garantie:

Hill-Rom biedt een garantie van 5 jaar op het foam en van 4 jaar op de hoes.

Maximaal therapeutisch gewicht..... 150 kg

Desinfectie:

Desinfecteer de hoes door deze schoon te maken met een 1000 ppm Hypochloride oplossing

Conform:

BS 7177 : 1996 : EN 597 1&2, GPDM D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

Hill-Rom NP150 Visco-elastisch matras is:

röntgendoorlaatbaar en latex vrij

 MDD 93/42/EEG voor klasse 1 medische apparatuur

Het Hill-Rom NP150 Visco-elastische matras biedt 2 verlengstukken

Standaard afmeting: 198cm

+9cm | +18cm



Neem contact op met Hill-Rom in Vianen voor verdere informatie.



www.hill-rom.com

Hill-Rom behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in design, specificaties en modellen. De enige garantie die Hill-Rom geeft is de uitdrukkelijk geschreven garantie op de verkoop of verhuur van de producten. Gefabriceerd door Hill-Rom SAS - Pluvigner, Frankrijk.

© 2008 Hill-Rom Services, Inc. – ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

France	+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom	+44 (0)1530 411000
Deutschland	+49 (0)211/16450-0
Nederland	+31 (0)347 32 35 32
Italia	+39 02-950541
Suisse/Schweiz	+41 (0)21/706 21 30
(deutschsprachig)021/706 21 38
Österreich	+43 (0)2243 / 28550
Ireland	+353 (0)1 413 6005
España	+34 (0)93 6856000
Portugal	+351 (0)210 991 891
Nordic Countries	+46 (0)8 564 353 60
Export:	
Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area manager via website or call	+1 812 934 8173